



Priloga A: Zrak v setih za enteralno hranjenje Joey in ePump

Šifra izdelka	Opis izdelka	Prizadete serije
666064	Set Joey 500 ml, SAMO ZA HRANJENJE	Vsi izdelki, proizvedeni od aprila 2022 s številkami serije od 22D do julija 2023 do številke serije 23G.
666106	666106 Set Joey 1000 ml, SAMO ZA HRANJENJE	
777501	Set Joey s konico ENPLUS, SAMO ZA HRANJENJE	
777502	Set Joey z dvema konicama ENPLUS, SAMO ZA HRANJENJE	
777503	Set Joey s konektorji ENPLUS 3-v-1, SAMO ZA HRANJENJE	
777106	Vrečka EZ za EPUMP 1000 ml, SAMO ZA HRANJENJE	


Pazite, da zrak ne zaide v cevke seta za hranjenje med polnjenjem.

- Pred priključitvijo na pacienta:
 - Izvedite dodatno polnjenje tako, da pritisnete in pridržite "GUMB ZA PRIDRŽANJE ZA POLNJENJE S HRANO".
 - Preverite, ali je v cevkah med črpalko in pacientom prisoten zrak.
 - Ne uporabite kompleta za hranjenje, če je viden enoten segment zraka z dolžino > 1,3 cm oziroma 0,5 palca ali več zračnih mehurčkov, ki skupaj dosežajo takšno dolžino.

Pazite, da zrak ne zaide v set za hranjenje med hranjenjem.

- Med vizitami za oceno stanja pacienta:
 - Pogosto preverjajte, ali je v cevkah preveč zraka.
 - Umaknite iz uporabe in zavrzite set za hranjenje, če je viden enoten segment zraka z dolžino > 1,3 cm oziroma 0,5 palca ali več zračnih mehurčkov, ki skupaj dosežajo takšno dolžino.

Opomba: nič nenavadnega ni in ne predstavlja težave, da je v cevkah za hranjenje vidna majhna količina zraka (do 1,3 cm ali 0,5 palca v dolžino).

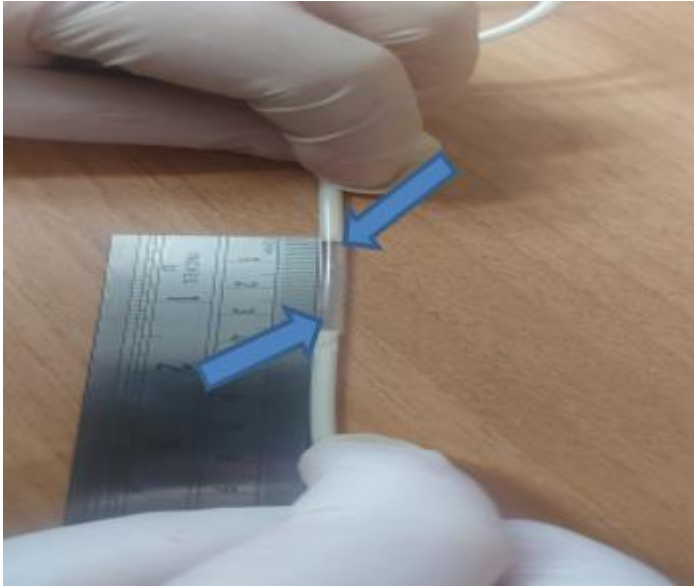

*To je samo primer pojava in zrak v cevki lahko ni tako izrazito opazen, kot je prikazano na sliki.