

Teleflex Medical
IDA Business & Technology Park,
Dublin Road, Athlone
Westmeath, Irska

April-2024

NUJNO – OBVESTILO O VARNOSTNEM POPRAVLJALNEM UKREPU

Vrsta ukrepa	svetovalno obvestilo			
Ime izdelka	Komplet intraaortnega balonskega katetra Arrow FiberOptix [®] ™ Komplet intraaortnega balonskega katetra Arrow [®] UltraFlex™			
Referenca za Teleflex	EIF-000561			
Koda izdelka	IAB-05830-LWS	IAB-05830-U	IAB-05840-LWS	IAB-05840-U
	IAB-05850-LWS	IAB-06830-U	IAB-06840-U	IAB-06850-U
Številka serije:	Glejte Dodatek 2			
Edinstveni identifikator pripomočka (UDI)				

Spoštovana stranka,

Podrobnosti o prizadetih izdelkih

Družba Arrow International LLC, podružnica družbe Teleflex Incorporated (skupaj "Teleflex"), je za zgoraj navedene izdelke sprožila prostovoljni varnostni korektivni ukrep (FSCA); za oznako izdelka, številko serije in enolično identifikacijsko oznako pripomočka (UDI) glejte Dodatek 2.

Opis vprašanja in potrebne takojšnje ukrepe


Družba Teleflex je sprožila ta prostovoljni korektivni ukrep za zgoraj omenjene izdelke, ker obstaja redko stanje, ki, **če ga ne prepoznate in popravite takoj, lahko privede do resnih posledic za zdravje**. To stanje se lahko izkaže kot:

- nezmožnost intraaortnega balona, da se popolnoma napolni po celotni dolžini.
- poškodovana ali zlomljena središčna svetlina v segmentu balona,
- izguba helija ali kri na poti helija,

Morebitne posledice zgoraj navedene težave vključujejo zmanjšanje ali izgubo hemodinamske podpore, ki jo običajno dovaja terapija IABP. Zaradi tega bi bilo treba pripomoček takoj zamenjati, kar povzroči zakasnitev ali začasno prekinitev terapije IABP. **To stanje lahko zato poveča tveganje za hemodinamske ali ishemične zaplete, vključno s smrtjo.** Med 5. 4. 2022 in 5. 4. 2024 je bilo prejetih skupno 337 poročil o zgoraj omenjenih pogojih. To vključuje poročila o 31 poškodbah in 3 smrtih. Kot je bilo poročano, dve od treh smrti nista bili povezane s težavo, do smrti bolnika pa je prišlo nekaj dni kasneje. V tretjem primeru je lahko smrt bolnika povezana ali pa ne; pripomoček se je uporabljal pri globoko kardiogenem šoku s ponavljajočimi se rdečimi alarmi.

Dejanja za zaznavanje te težave:

1. Pred uporabo **zagotovite, da je na voljo nadomestni kateter IAB**, v primeru, da je potreben nadomestni pripomoček.
2. Pred vstavitvijo **morajo uporabniki pregledati vse zadevne katetre IAB** za znake čezmerno zvitega balonskega ovoja ali upognjenega tulca balona. Čezmerno zvijanje se kaže kot progresivna napetost ali tesnost v spiralnem ovojju na distalnem ali proksimalnem koncu balona. Primeri pravilnega ovoja v primerjavi s čezmerno zvitim ovojjem so prikazani na slikah 1a in 1b spodaj. Katetrov ne vstavljajte, če kaže čezmerno zvit ovoj. **Vendar pa vsi prizadeti katetri ne bodo imeli vidno čezmerno zvit balonski ovoj.**

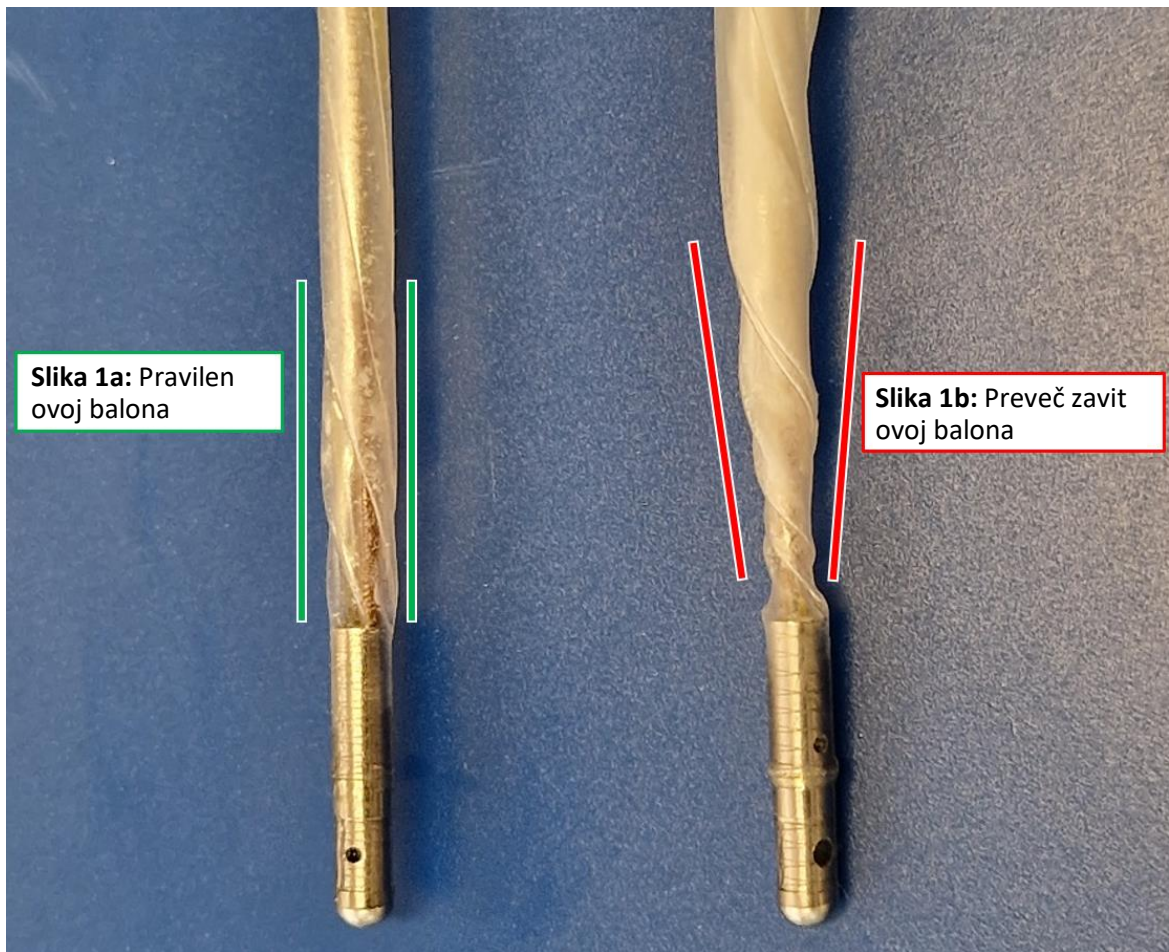

Slika 1

3. Vse zadevne katetre IAB je treba vstaviti pod fluoroskopskim nadzorom. Ko je vstavljen in priključen, **s fluoroskopijo ocenite popolnost napihovanja balona**. Fluoroskopska ocena mora obsegati celotno dolžino balona (po potrebi premikajte slikanje) in vključevati več ciklov polnjenja/praznjenja. Občasna fluoroskopija mora ostati na voljo do 3 minute po tem, ko se začne ciklično protipulziranje ena-na-ena ali dokler ni potrjeno polnjenje celotnega balona.
4. Kot vedno morajo biti uporabniki pozorni in se odzivati na alarme črpalke v skladu z navodili za uporabo in navodili za uporabnike.
 - V primeru, da uporabljate črpalke Arrow AC3 ali Autocat-2, se lahko vključita zvok in prikaz za **alarm za visok tlak** ali **alarm za visoko osnovno linijo** na konzoli črpalke. Ti rdeči alarmi zahtevajo takojšen odziv v skladu z navodili za uporabo in navodili za uporabo. Alarmi uporabnikom zagotavljajo algoritem za odpravljanje težav, kar vključuje nepopolno napihovanje IAB.
 - V primeru, da uporabljate črpalke Getinge CardioSave, se lahko sproži alarm **Blokada katetra IAB**.
 - Alarm katere koli črpalke, **ki kaže na puščanje helija (izgubo helija ali izgubo plina)** lahko nakazuje, da kateter IAB ne deluje v skladu s pričakovanji.
 - Kot vedno je na voljo telefonska podpora v živo za katetre Arrow IABP in IAB, dosežete jo lahko s podatki Podpore nege bolnikov spodaj.
5. Kot vedno morajo biti uporabniki med oskrbo pozorni na indikatorje, da kateter IAB ne deluje, kot je pričakovano, vključno s/z:
 - kri v cevi helija,
 - nižja okrepitev diastoličnega tlaka od pričakovane.

Takojšni ukrepi v primeru te težave:

Če sumite, da pri katetru IAB ta težava obstaja zaradi katere koli od zgoraj navedenih lastnosti, je treba kateter odstraniti in zamenjati po korakih, ki so opisani v navodilih za uporabo. Nadomestni balonski kateter lahko vstavite kontralateralno ali ipsilateralno, kot določi odgovorni zdravnik po presoji bolnikovih posameznih možnosti femoralnega dostopa in ustreznih kliničnih značilnosti.

O vsakem sumu pojava tega stanja je treba takoj poročati teleflexu, pri čemer uporabite spodnje podatke za stik, kakor hitro je to praktično mogoče. Če je potrebno, se obrnite na lokalnega prodajnega zastopnika.

Naša dokumentacija navaja, da ste prejeli izdelke, ki so predmet tega obvestila FSCA.

Izdelek se ne odstrani; izdelke, ki so vključeni v to svetovalno obvestilo, lahko še naprej uporabljate skladno z dodatnimi navodili, opozorili in svarili v tem dokumentu.

Upoštevajte spodaj navedene ukrepe samo za navedeno lokacijo pripomočka:

Lokacija pripomočka	Številka seznama ukrepov
Zdravstvene ustanove (bolnišnice, zdravstveno osebje ipd.)	1
Distributerji	2

Številka seznama ukrepov 1 – Zdravstvene ustanove

1. Ta nasvet takoj podajte vsem osebam, ki morajo biti seznanjene v vaši organizaciji (npr. koronarni enoti, oddelku za intervencijsko kardiologijo, laboratoriju s srčnimi katetri itd.) ali v katero koli organizacijo, v kateri je bil potencialno prizadet izdelek prenesen.
2. Zahtevamo, da takoj preverite svoj inventar za izdelek v okviru tega nujnega obvestila o medicinskih pripomočkih.
3. Če imate zadevni izdelek, označite ustrezno potrditveno polje na potrditvenem obrazcu (Dodatek 1) in obrazec vrnite Službi za pomoč strankam družbe Teleflex na kontaktne podatke, ki so na voljo in priložite izvod tega obvestila skupaj z vsemi prizadetimi izdelki. Če želite vrniti prizadeti izdelek, lahko to začnete tudi tako, da se obrnete na službo za pomoč strankam družbe Teleflex na kontaktne podatke, navedene spodaj.
4. Če tega izdelka nimate, označite ustrezno potrditveno polje na potrditvenem obrazcu (Dodatek 1) in obrazec vrnite podjetju Teleflex z uporabo podatkov za stik.

Številka seznama ukrepov 2 – Distributerji

1. Posodobite kontaktne podatke na straneh štiri in pet, od podatkov službe za pomoč strankam družbe Teleflex do vaših podatkov.
2. To varnostno obvestilo takoj podajte vsem strankam, ki so prejele prizadeti izdelek. Zahtevajte, da vaš kupec izpolni potrditveni obrazec (Dodatek 1) in ga vrne vam.
3. Zahtevamo, da takoj preverite svoj inventar za zadevni izdelek, ki ga obsega ta FSCA, za seznam prizadetih kod in serije glejte Dodatek 2. Vsem prizadetim izdelkom priložite kopijo tega obvestila in zagotovite, da je obvestilo priloženo prihodnji distribuciji prizadetih izdelkov.
4. Kot distributer morate Teleflexu potrditi, da ste zaključili dejavnosti opisane v dejanjih 1 in 2 na tem seznamu dejanj št. 2. Ko končate ukrepe, posredujte izpolnjen potrditveni obrazec službi za pomoč strankam.
5. Upoštevajte, da bo družba Teleflex obvestila vse pristojne organe v Evropskem gospodarskem prostoru/Švici/Združenem kraljestvu (EGP/CH/UK)/Turčiji, v katerih družba Teleflex distribuira neposredno.

6. Če ste izdelek distribuirali izven svoje države, prosimo, da obvestite službo za pomoč strankam družbe Teleflex po e-pošti na spodnji elektronski naslov.
7. Če ste distributer in/ali ste odgovorni za poročanje znotraj ali zunaj regije EGP/CH/TR/UK, o tem ukrepu obvestite svoj lokalni pristojni organ. Obvestilo in vso korespondenco z lokalnim pristojnim organom posredujte družbi Teleflex.

Poročanje o neželenih dogodkih

O neželenih učinkih ali težavah s kakovostjo, do katerih pride pri uporabi tega izdelka, je treba službo za pomoč strankam družbe Teleflex obvestiti prek spodnjih podatkov za stik.

Prenos tega svetovalnega obvestila

To svetovalno obvestilo je treba dati vsem osebam, ki morajo biti seznanjene v vaši organizaciji ali v kateri koli organizaciji, v katero je bil prenešen potencialno prizadet izdelek.

Pri pošiljanju tega obvestila upoštevajte končne uporabnike, zdravnike, upravitelje tveganj, dobavne verige/distribucijske domove, servisne oddelke itd. Poskrbite, da bodo s tem obvestilom seznanjeni vsi, dokler v vaši ustanovi ne bodo izvedeni vsi potrebni ukrepi.

Informacije za stik

Kot vedno je na voljo telefonska podpora v živo za katetre Arrow IABP in IAB, dosežete jo lahko s podatki Podpore nege bolnikov spodaj. Za dodatne informacije ali pomoč glede težave se obrnite na službo za pomoč strankam družbe Teleflex prek e-pošte, telefona ali faksa.

24/7 Podpora nege bolnikov:

Telefon: (978) 250-5177 Mednarodno

Služba za pomoč strankam:

Oseba za stik: Shane Kenny

Telefon: +353 (0)86 3479154

E-pošta: Recalls.Intl@teleflex.com

Družba Teleflex se zavezuje, da zagotavlja visokokakovostne, varne in učinkovite izdelke. Iskreno se opravičujemo za vse morebitne nevednosti, ki vam jih to lahko povzroči. Z vsemi dodatnimi vprašanji se lahko obrnete na lokalnega prodajnega zastopnika ali službo za pomoč strankam družbe Teleflex.

Podpisani potrjuje, da je bilo to obvestilo obveščeno ustreznemu regulativnemu organu.

Za in v imenu družbe Teleflex,

Padraig Hegarty

Padraig Hegarty, podpredsednik za globalno zagotavljanje kakovosti (v proizvodnji)

Dodatek 1

Št. stranke

VARNOSTNO KOREKTIVNI UKREP
POTRDITVENI OBRAZEC

**OBVESTILO O VARNOSTNO KOREKTIVNEM UKREPU DRUŽBE TELEFLEX –
POTREBNA JE TAKOJŠNJA POZORNOST**

Ref. EIF-000561

IZPOLNJEN OBRAZEC TAKOJ VRNITE NA:

E-mail: Recalls.Intl@teleflex.com

<input type="checkbox"/> Potrjujemo prejem tega svetovalnega obvestila in izvedbo zahtevanih ukrepov, ki jih vsebuje. Poleg tega potrjujemo, da naš inventar NE vsebuje izdelkov, na katere se nanaša to svetovalno obvestilo.	<input type="checkbox"/> Potrjujemo prejem tega svetovalnega obvestila in izvedbo zahtevanih ukrepov, ki jih vsebuje. Poleg tega potrjujemo, da naš inventar VSEBUJE izdelke, na katere se nanaša to svetovalno obvestilo.
---	---

Izpolnite ta obrazec za potrditev in izpolnjenega takoj vrnite, pri čemer uporabite zgornje podatke za stik.

IME USTANOVE (NPR. IME BOLNIŠNICE, ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE)	
NASLOV USTANOVE	TELEFON/FAKS
OBRAZEC JE IZPOLNIL	Žig
IME S TISKANIMI ČRKAMI: _____ PODPIS: _____	
DATUM	

Dodatek 2: EIF-000561 - Koda izdelka, številka serije, informacije o enolični identifikaciji pripomočka (UDI)

Koda izdelka	Številka serije	Edinstveni identifikator pripomočka (UDI)
IAB-05830-LWS	18F23A0038	(01)10801902161892(17)241231(10)18F23A0038
IAB-05830-LWS	18F23B0023	(01)10801902161892(17)250131(10)18F23B0023
IAB-05830-LWS	18F23C0026	(01)10801902172843(17)250228(10)18F23C0026
IAB-05830-LWS	18F23D0024	(01)10801902161892(17)250430(10)18F23D0024
IAB-05830-LWS	18F23F0049	(01)10801902172843(17)250531(10)18F23F0049
IAB-05830-LWS	18F23H0060	(01)10801902161892(17)250731(10)18F23H0060
IAB-05830-LWS	18F23J0001	(01)10801902172843(17)250831(10)18F23J0001
IAB-05830-LWS	18F23J0075	(01)10801902161892(17)250930(10)18F23J0075
IAB-05830-LWS	18F23K0013	(01)10801902161892(17)250930(10)18F23K0013
IAB-05830-LWS	18F23L0019	(01)10801902161892(17)251031(10)18F23L0019
IAB-05830-LWS	18F23L0041	(01)10801902161892(17)251031(10)18F23L0041
IAB-05830-LWS	18F23L0054	(01)10801902172843(17)251031(10)18F23L0054
IAB-05830-LWS	18F23M0056	(01)10801902172843(17)251130(10)18F23M0056
IAB-05830-LWS	18F24A0015	(01)10801902172843(17)251231(10)18F24A0015
IAB-05830-LWS	18F24A0040	(01)10801902172843(17)260131(10)18F24A0040
IAB-05830-LWS	18F24B0008	(01)10801902161892(17)260131(10)18F24B0008
IAB-05830-LWS	18F24B0013	(01)10801902172843(17)260131(10)18F24B0013
IAB-05830-LWS	18F24C0058	(01)10801902161892(17)260228(10)18F24C0058
IAB-05830-LWS	18F24C0061	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0061
IAB-05830-LWS	18F24C0088	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0088
IAB-05830-LWS	18F24C0089	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0089
IAB-05830-LWS	18F24C0101	(01)10801902161892(17)260228(10)18F24C0101
IAB-05830-LWS	18F24C0109	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0109
IAB-05830-LWS	18F24C0110	(01)10801902172843(17)260228(10)18F24C0110
IAB-05830-LWS	18F24C0172	(01)10801902172843(17)260331(10)18F24C0172
IAB-05830-LWS	18F24C0173	(01)10801902172843(17)260331(10)18F24C0173
IAB-05830-LWS	18F24C0174	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0174
IAB-05830-LWS	18F24C0175	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0175
IAB-05830-LWS	18F24C0176	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0176
IAB-05830-LWS	18F24C0185	(01)10801902172843(17)46112(10)18F24C0185
IAB-05830-LWS	18F24D0002	(01)10801902161892(17)260331(10)18F24D0002
IAB-05830-U	18F22F0023	(01)10801902172850(17)240531(10)18F22F0023
IAB-05830-U	18F22G0005	(01)10801902172850(17)240630(10)18F22G0005
IAB-05830-U	18F22G0010	(01)10801902172850(17)240630(10)18F22G0010
IAB-05830-U	18F22H0033	(01)10801902172850(17)240731(10)18F22H0033
IAB-05830-U	18F23E0032	(01)10801902182019(17)250430(10)18F23E0032
IAB-05830-U	18F23J0002	(01)10801902182019(17)250831(10)18F23J0002
IAB-05830-U	18F23J0031	(01)10801902172850(17)250831(10)18F23J0031
IAB-05830-U	18F23J0082	(01)10801902182019(17)250831(10)18F23J0082
IAB-05830-U	18F23K0025	(01)10801902182019(17)250930(10)18F23K0025
IAB-05830-U	18F23K0036	(01)10801902172850(17)250930(10)18F23K0036
IAB-05830-U	18F23K0042	(01)10801902172850(17)250930(10)18F23K0042
IAB-05830-U	18F23M0001	(01)10801902172850(17)251130(10)18F23M0001
IAB-05830-U	18F24C0131	(01)10801902182019(17)260331(10)18F24C0131
IAB-05840-LWS	18F22E0008	(01)10801902172867(17)240430(10)18F22E0008
IAB-05840-LWS	18F22E0029	(01)10801902172867(17)240430(10)18F22E0029
IAB-05840-LWS	18F22F0006	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0006
IAB-05840-LWS	18F22F0018	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0018

Dodatek 2: EIF-000561 - Koda izdelka, številka serije, informacije o enolični identifikaciji pripomočka (UDI)

Koda izdelka	Številka serije	Edinstveni identifikator pripomočka (UDI)
IAB-05840-LWS	18F22F0039	(01)10801902172867(17)240531(10)18F22F0039
IAB-05840-LWS	18F22F0072	(01)10801902167733(17)240531(10)18F22F0072
IAB-05840-LWS	18F22G0002	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0002
IAB-05840-LWS	18F22G0003	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0003
IAB-05840-LWS	18F22G0019	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0019
IAB-05840-LWS	18F22G0021	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0021
IAB-05840-LWS	18F22G0031	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0031
IAB-05840-LWS	18F22G0046	(01)10801902167733(17)240630(10)18F22G0046
IAB-05840-LWS	18F22G0059	(01)10801902172867(17)240630(10)18F22G0059
IAB-05840-LWS	18F22H0009	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0009
IAB-05840-LWS	18F22H0023	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0023
IAB-05840-LWS	18F22H0035	(01)10801902172867(17)240731(10)18F22H0035
IAB-05840-LWS	18F22H0058	(01)10801902167733(17)240731(10)18F22H0058
IAB-05840-LWS	18F22J0025	(01)10801902172867(17)240831(10)18F22J0025
IAB-05840-LWS	18F22K0015	(01)10801902167733(17)240930(10)18F22K0015
IAB-05840-LWS	18F22K0016	(01)10801902172867(17)240930(10)18F22K0016
IAB-05840-LWS	18F22M0017	(01)10801902167733(17)241130(10)18F22M0017
IAB-05840-LWS	18F22M0018	(01)10801902167733(17)241130(10)18F22M0018
IAB-05840-LWS	18F23A0004	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0004
IAB-05840-LWS	18F23A0005	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0005
IAB-05840-LWS	18F23A0018	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0018
IAB-05840-LWS	18F23A0026	(01)10801902167733(17)241231(10)18F23A0026
IAB-05840-LWS	18F23B0008	(01)10801902167733(17)250131(10)18F23B0008
IAB-05840-LWS	18F23B0016	(01)10801902167733(17)250131(10)18F23B0016
IAB-05840-LWS	18F23E0020	(01)10801902172867(17)250430(10)18F23E0020
IAB-05840-LWS	18F23E0054	(01)10801902167733(17)250531(10)18F23E0054
IAB-05840-LWS	18F23F0002	(01)10801902172867(17)250531(10)18F23F0002
IAB-05840-LWS	18F23F0026	(01)10801902172867(17)250531(10)18F23F0026
IAB-05840-LWS	18F23G0008	(01)10801902172867(17)250630(10)18F23G0008
IAB-05840-LWS	18F23G0017	(01)10801902167733(17)250630(10)18F23G0017
IAB-05840-LWS	18F23G0057	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23G0057
IAB-05840-LWS	18F23H0013	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23H0013
IAB-05840-LWS	18F23H0029	(01)10801902167733(17)250731(10)18F23H0029
IAB-05840-LWS	18F23H0055	(01)10801902172867(17)250731(10)18F23H0055
IAB-05840-LWS	18F23H0064	(01)10801902167733(17)250731(10)18F23H0064
IAB-05840-LWS	18F23J0003	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0003
IAB-05840-LWS	18F23J0037	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0037
IAB-05840-LWS	18F23J0072	(01)10801902172867(17)250831(10)18F23J0072
IAB-05840-LWS	18F23J0073	(01)10801902172867(17)250930(10)18F23J0073
IAB-05840-LWS	18F23K0054	(01)10801902172867(17)251031(10)18F23K0054
IAB-05840-LWS	18F23L0009	(01)10801902167733(17)251031(10)18F23L0009
IAB-05840-LWS	18F23L0028	(01)10801902167733(17)251031(10)18F23L0028
IAB-05840-LWS	18F23L0055	(01)10801902172867(17)251130(10)18F23L0055
IAB-05840-LWS	18F23M0043	(01)10801902172867(17)251130(10)18F23M0043
IAB-05840-LWS	18F23M0068	(01)10801902167733(17)251231(10)18F23M0068
IAB-05840-LWS	18F24A0025	(01)10801902172867(17)251231(10)18F24A0025
IAB-05840-LWS	18F24A0030	(01)10801902167733(17)251231(10)18F24A0030
IAB-05840-LWS	18F24A0031	(01)10801902172867(17)251231(10)18F24A0031

Dodatek 2: EIF-000561 - Koda izdelka, številka serije, informacije o enolični identifikaciji pripomočka (UDI)

Koda izdelka	Številka serije	Edinstveni identifikator pripomočka (UDI)
IAB-05840-LWS	18F24A0039	(01)10801902167733(17)251231(10)18F24A0039
IAB-05840-LWS	18F24B0005	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0005
IAB-05840-LWS	18F24B0015	(01)10801902167733(17)260131(10)18F24B0015
IAB-05840-LWS	18F24B0031	(01)10801902167733(17)260131(10)18F24B0031
IAB-05840-LWS	18F24B0048	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0048
IAB-05840-LWS	18F24B0052	(01)10801902172867(17)260131(10)18F24B0052
IAB-05840-LWS	18F24B0078	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24B0078
IAB-05840-LWS	18F24C0008	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0008
IAB-05840-LWS	18F24C0036	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0036
IAB-05840-LWS	18F24C0064	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0064
IAB-05840-LWS	18F24C0065	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0065
IAB-05840-LWS	18F24C0067	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0067
IAB-05840-LWS	18F24C0068	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0068
IAB-05840-LWS	18F24C0069	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0069
IAB-05840-LWS	18F24C0071	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0071
IAB-05840-LWS	18F24C0072	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0072
IAB-05840-LWS	18F24C0075	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0075
IAB-05840-LWS	18F24C0076	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0076
IAB-05840-LWS	18F24C0077	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0077
IAB-05840-LWS	18F24C0078	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0078
IAB-05840-LWS	18F24C0079	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0079
IAB-05840-LWS	18F24C0080	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0080
IAB-05840-LWS	18F24C0081	(01)10801902167733(17)260228(10)18F24C0081
IAB-05840-LWS	18F24C0083	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0083
IAB-05840-LWS	18F24C0105	(01)10801902172867(17)260228(10)18F24C0105
IAB-05840-LWS	18F24C0186	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0186
IAB-05840-LWS	18F24C0187	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0187
IAB-05840-LWS	18F24C0188	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0188
IAB-05840-LWS	18F24C0193	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24C0193
IAB-05840-LWS	18F24D0020	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0020
IAB-05840-LWS	18F24D0021	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0021
IAB-05840-LWS	18F24D0022	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0022
IAB-05840-LWS	18F24D0031	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0031
IAB-05840-LWS	18F24D0032	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0032
IAB-05840-LWS	18F24D0037	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0037
IAB-05840-LWS	18F24D0038	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0038
IAB-05840-LWS	18F24D0039	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0039
IAB-05840-LWS	18F24D0042	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0042
IAB-05840-LWS	18F24D0044	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0044
IAB-05840-LWS	18F24D0045	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0045
IAB-05840-LWS	18F24D0049	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0049
IAB-05840-LWS	18F24D0050	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0050
IAB-05840-LWS	18F24D0051	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0051
IAB-05840-LWS	18F24D0054	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0054
IAB-05840-LWS	18F24D0055	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0055
IAB-05840-LWS	18F24D0072	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0072
IAB-05840-LWS	18F24D0087	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0087
IAB-05840-LWS	18F24D0088	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0088

Dodatek 2: EIF-000561 - Koda izdelka, številka serije, informacije o enolični identifikaciji pripomočka (UDI)

Koda izdelka	Številka serije	Edinstveni identifikator pripomočka (UDI)
IAB-05840-LWS	18F24D0089	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0089
IAB-05840-LWS	18F24D0090	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0090
IAB-05840-LWS	18F24D0091	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0091
IAB-05840-LWS	18F24D0092	(01)10801902167733(17)260331(10)18F24D0092
IAB-05840-U	18F22E0012	(01)10801902172874(17)240430(10)18F22E0012
IAB-05840-U	18F22G0011	(01)10801902172874(17)240630(10)18F22G0011
IAB-05840-U	18F22G0016	(01)10801902172874(17)240630(10)18F22G0016
IAB-05840-U	18F22G0051	(01)10801902161922(17)240630(10)18F22G0051
IAB-05840-U	18F23A0002	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0002
IAB-05840-U	18F23A0021	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0021
IAB-05840-U	18F23A0060	(01)10801902161922(17)241231(10)18F23A0060
IAB-05840-U	18F23G0068	(01)10801902161922(17)250731(10)18F23G0068
IAB-05840-U	18F23K0008	(01)10801902172874(17)251130(10)18F23K0008
IAB-05840-U	18F23K0012	(01)10801902161922(17)250930(10)18F23K0012
IAB-05840-U	18F23K0039	(01)10801902172874(17)250930(10)18F23K0039
IAB-05840-U	18F23K0053	(01)10801902161922(17)251031(10)18F23K0053
IAB-05840-U	18F23K0063	(01)10801902161922(17)251031(10)18F23K0063
IAB-05840-U	18F23L0010	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0010
IAB-05840-U	18F23L0031	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0031
IAB-05840-U	18F23L0039	(01)10801902172874(17)251031(10)18F23L0039
IAB-05840-U	18F24B0051	(01)10801902161922(17)260131(10)18F24B0051
IAB-05850-LWS	18F22J0037	(01)10801902167726(17)240831(10)18F22J0037(13)220927
IAB-05850-LWS	18F22J0040	(01)10801902167726(17)240831(10)18F22J0040(13)220929
IAB-05850-LWS	18F22K0044	(01)10801902167726(17)240930(10)18F22K0044(13)221021
IAB-05850-LWS	18F22K0045	(01)10801902167726(17)240930(10)18F22K0045(13)221021
IAB-05850-LWS	18F22K0056	(01)10801902167726(17)241031(10)18F22K0056(13)221028
IAB-05850-LWS	18F22L0012	(01)10801902167726(17)241031(10)18F22L0012(13)221104
IAB-05850-LWS	18F23K0006	(01)10801902167726(17)250930(10)18F23K0006(13)231031
IAB-05850-LWS	18F23K0038	(01)10801902172881(17)250930(10)18F23K0038(13)231028
IAB-05850-LWS	18F24B0049	(01)10801902167726(17)260131(10)18F24B0049(13)240227
IAB-05850-LWS	18F24B0075	(01)10801902167726(17)260228(10)18F24B0075(13)240301
IAB-05850-LWS	18F24C0031	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0031(13)240316
IAB-05850-LWS	18F24C0032	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0032(13)240331
IAB-05850-LWS	18F24C0033	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0033(13)240315
IAB-05850-LWS	18F24C0034	(01)10801902172881(17)260228(10)18F24C0034(13)240315
IAB-06830-U	18F22E0062	(01)10801902172898(17)240430(10)18F22E0062
IAB-06830-U	18F22F0007	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0007
IAB-06830-U	18F22F0017	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0017
IAB-06830-U	18F22F0020	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0020
IAB-06830-U	18F22F0034	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0034
IAB-06830-U	18F22F0045	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0045
IAB-06830-U	18F22F0057	(01)10801902172898(17)240531(10)18F22F0057
IAB-06830-U	18F22G0001	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0001
IAB-06830-U	18F22G0004	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0004
IAB-06830-U	18F22G0007	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0007
IAB-06830-U	18F22G0014	(01)10801902172898(17)240630(10)18F22G0014
IAB-06830-U	18F22H0002	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0002
IAB-06830-U	18F22H0008	(01)10801902161939(17)240731(10)18F22H0008

Dodatek 2: EIF-000561 - Koda izdelka, številka serije, informacije o enolični identifikaciji pripomočka (UDI)

Koda izdelka	Številka serije	Edinstveni identifikator pripomočka (UDI)
IAB-06830-U	18F22H0024	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0024
IAB-06830-U	18F22H0029	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0029
IAB-06830-U	18F22H0034	(01)10801902172898(17)240731(10)18F22H0034
IAB-06830-U	18F22J0009	(01)10801902172898(17)240831(10)18F22J0009
IAB-06830-U	18F22M0019	(01)10801902161939(17)241130(10)18F22M0019
IAB-06830-U	18F23A0027	(01)10801902161939(17)241231(10)18F23A0027
IAB-06830-U	18F23A0039	(01)10801902161939(17)241231(10)18F23A0039
IAB-06830-U	18F23B0006	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0006
IAB-06830-U	18F23B0020	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0020
IAB-06830-U	18F23B0032	(01)10801902161939(17)250131(10)18F23B0032
IAB-06830-U	18F23D0029	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23D0029
IAB-06830-U	18F23E0033	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23E0033
IAB-06830-U	18F23E0037	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23E0037
IAB-06830-U	18F23E0038	(01)10801902172898(17)250430(10)18F23E0038
IAB-06830-U	18F23E0057	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23E0057
IAB-06830-U	18F23F0023	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23F0023
IAB-06830-U	18F23F0045	(01)10801902172898(17)250531(10)18F23F0045
IAB-06830-U	18F23G0025	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0025
IAB-06830-U	18F23G0026	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0026
IAB-06830-U	18F23G0051	(01)10801902172898(17)250630(10)18F23G0051
IAB-06830-U	18F23G0066	(01)10801902161939(17)250630(10)18F23G0066
IAB-06830-U	18F23G0067	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23G0067
IAB-06830-U	18F23H0009	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0009
IAB-06830-U	18F23H0011	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23H0011
IAB-06830-U	18F23H0025	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0025
IAB-06830-U	18F23H0028	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0028
IAB-06830-U	18F23H0059	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0059
IAB-06830-U	18F23H0069	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0069
IAB-06830-U	18F23H0070	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0070
IAB-06830-U	18F23H0074	(01)10801902161939(17)250731(10)18F23H0074
IAB-06830-U	18F23H0080	(01)10801902172898(17)250731(10)18F23H0080
IAB-06830-U	18F23J0004	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0004
IAB-06830-U	18F23J0011	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0011
IAB-06830-U	18F23J0015	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0015
IAB-06830-U	18F23J0046	(01)10801902161939(17)250831(10)18F23J0046
IAB-06830-U	18F23J0053	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0053
IAB-06830-U	18F23J0054	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0054
IAB-06830-U	18F23J0055	(01)10801902172898(17)250831(10)18F23J0055
IAB-06830-U	18F23J0079	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23J0079
IAB-06830-U	18F23K0003	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0003
IAB-06830-U	18F23K0005	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0005
IAB-06830-U	18F23K0009	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0009
IAB-06830-U	18F23K0051	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0051
IAB-06830-U	18F23K0059	(01)10801902161939(17)250930(10)18F23K0059
IAB-06830-U	18F23K0061	(01)10801902172898(17)250930(10)18F23K0061
IAB-06830-U	18F23L0040	(01)10801902172898(17)251031(10)18F23L0040
IAB-06830-U	18F23M0002	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0002
IAB-06830-U	18F23M0044	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0044

Dodatek 2: EIF-000561 - Koda izdelka, številka serije, informacije o enolični identifikaciji pripomočka (UDI)

Koda izdelka	Številka serije	Edinstveni identifikator pripomočka (UDI)
IAB-06830-U	18F23M0049	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0049
IAB-06830-U	18F23M0053	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0053
IAB-06830-U	18F23M0054	(01)10801902172898(17)251130(10)18F23M0054
IAB-06830-U	18F23M0055	(01)10801902172898(17)251231(10)18F23M0055
IAB-06830-U	18F24A0006	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0006
IAB-06830-U	18F24A0012	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0012
IAB-06830-U	18F24A0013	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0013
IAB-06830-U	18F24A0021	(01)10801902172898(17)251231(10)18F24A0021
IAB-06830-U	18F24A0036	(01)10801902161939(17)251231(10)18F24A0036
IAB-06830-U	18F24B0014	(01)10801902172898(17)260131(10)18F24B0014
IAB-06830-U	18F24C0004	(01)10801902172898(17)260228(10)18F24C0004
IAB-06830-U	18F24C0005	(01)10801902172898(17)260228(10)18F24C0005
IAB-06830-U	18F24D0004	(01)10801902161939(17)260331(10)18F24D0004
IAB-06830-U	18F24D0033	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0033
IAB-06830-U	18F24D0036	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0036
IAB-06830-U	18F24D0043	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0043
IAB-06830-U	18F24D0048	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0048
IAB-06830-U	18F24D0086	(01)10801902172898(17)260331(10)18F24D0086
IAB-06840-U	18F22E0001	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0001
IAB-06840-U	18F22E0009	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0009
IAB-06840-U	18F22E0014	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0014
IAB-06840-U	18F22E0020	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0020
IAB-06840-U	18F22E0023	(01)10801902161946(17)240430(10)18F22E0023
IAB-06840-U	18F22E0036	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0036
IAB-06840-U	18F22E0037	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0037
IAB-06840-U	18F22E0042	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0042
IAB-06840-U	18F22E0046	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0046
IAB-06840-U	18F22E0048	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0048
IAB-06840-U	18F22E0049	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0049
IAB-06840-U	18F22E0061	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0061
IAB-06840-U	18F22E0065	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0065
IAB-06840-U	18F22E0066	(01)10801902172904(17)240430(10)18F22E0066
IAB-06840-U	18F22F0002	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0002
IAB-06840-U	18F22F0009	(01)10801902161946(17)240531(10)18F22F0009
IAB-06840-U	18F22F0010	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0010
IAB-06840-U	18F22F0016	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0016
IAB-06840-U	18F22F0019	(01)10801902161946(17)240531(10)18F22F0019
IAB-06840-U	18F22F0021	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0021
IAB-06840-U	18F22F0022	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0022
IAB-06840-U	18F22F0037	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0037
IAB-06840-U	18F22F0043	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0043
IAB-06840-U	18F22F0047	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0047
IAB-06840-U	18F22F0050	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0050
IAB-06840-U	18F22F0051	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0051
IAB-06840-U	18F22F0054	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0054
IAB-06840-U	18F22F0065	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0065
IAB-06840-U	18F22F0066	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0066
IAB-06840-U	18F22F0067	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22F0067

Dodatek 2: EIF-000561 - Koda izdelka, številka serije, informacije o enolični identifikaciji pripomočka (UDI)

Koda izdelka	Številka serije	Edinstveni identifikator pripomočka (UDI)
IAB-06840-U	18F22G0067	(01)10801902172904(17)240630(10)18F22G0067
IAB-06840-U	18F22H0004	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0004
IAB-06840-U	18F22H0010	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0010
IAB-06840-U	18F22H0014	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0014
IAB-06840-U	18F22H0026	(01)10801902172904(17)240531(10)18F22H0026
IAB-06840-U	18F22H0028	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0028
IAB-06840-U	18F22H0030	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0030
IAB-06840-U	18F22H0036	(01)10801902161946(17)240731(10)18F22H0036
IAB-06840-U	18F22H0038	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0038
IAB-06840-U	18F22H0039	(01)10801902172904(17)240731(10)18F22H0039
IAB-06840-U	18F22K0004	(01)10801902172904(17)240930(10)18F22K0004
IAB-06840-U	18F22M0015	(01)10801902161946(17)241130(10)18F22M0015
IAB-06840-U	18F23A0019	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0019
IAB-06840-U	18F23A0025	(01)10801902161946(17)250228(10)18F23A0025
IAB-06840-U	18F23A0037	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0037
IAB-06840-U	18F23A0054	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0054
IAB-06840-U	18F23A0055	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0055
IAB-06840-U	18F23A0061	(01)10801902161946(17)241231(10)18F23A0061
IAB-06840-U	18F23A0066	(01)10801902161946(17)250131(10)18F23A0066
IAB-06840-U	18F23A0067	(01)10801902161946(17)250131(10)18F23A0067
IAB-06840-U	18F23B0018	(01)10801902161946(17)250228(10)18F23B0018
IAB-06840-U	18F23C0017	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0017
IAB-06840-U	18F23C0027	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0027
IAB-06840-U	18F23C0044	(01)10801902172904(17)250228(10)18F23C0044
IAB-06840-U	18F23D0015	(01)10801902172904(17)250331(10)18F23D0015
IAB-06840-U	18F23D0018	(01)10801902161946(17)250331(10)18F23D0018
IAB-06840-U	18F23D0027	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23D0027
IAB-06840-U	18F23D0028	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23D0028
IAB-06840-U	18F23E0013	(01)10801902161946(17)250430(10)18F23E0013
IAB-06840-U	18F23E0014	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0014
IAB-06840-U	18F23E0015	(01)10801902161946(17)250430(10)18F23E0015
IAB-06840-U	18F23E0028	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0028
IAB-06840-U	18F23E0035	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0035
IAB-06840-U	18F23E0036	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0036
IAB-06840-U	18F23E0050	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0050
IAB-06840-U	18F23E0051	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0051
IAB-06840-U	18F23E0052	(01)10801902172904(17)250430(10)18F23E0052
IAB-06840-U	18F23E0055	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23E0055
IAB-06840-U	18F23F0003	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0003
IAB-06840-U	18F23F0006	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0006
IAB-06840-U	18F23F0007	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0007
IAB-06840-U	18F23F0014	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0014
IAB-06840-U	18F23F0015	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0015
IAB-06840-U	18F23F0024	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0024
IAB-06840-U	18F23F0025	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0025
IAB-06840-U	18F23F0048	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0048
IAB-06840-U	18F23F0052	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0052
IAB-06840-U	18F23F0054	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0054

Dodatek 2: EIF-000561 - Koda izdelka, številka serije, informacije o enolični identifikaciji pripomočka (UDI)

Koda izdelka	Številka serije	Edinstveni identifikator pripomočka (UDI)
IAB-06840-U	18F23F0059	(01)10801902172904(17)250531(10)18F23F0059
IAB-06840-U	18F23G0002	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0002
IAB-06840-U	18F23G0003	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0003
IAB-06840-U	18F23G0005	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0005
IAB-06840-U	18F23G0007	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0007
IAB-06840-U	18F23G0011	(01)10801902161946(17)250630(10)18F23G0011
IAB-06840-U	18F23G0014	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0014
IAB-06840-U	18F23G0028	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0028
IAB-06840-U	18F23G0050	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0050
IAB-06840-U	18F23G0053	(01)10801902172904(17)250630(10)18F23G0053
IAB-06840-U	18F23G0063	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23G0063
IAB-06840-U	18F23G0064	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23G0064
IAB-06840-U	18F23G0065	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23G0065
IAB-06840-U	18F23H0033	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23H0033
IAB-06840-U	18F23H0034	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0034
IAB-06840-U	18F23H0035	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0035
IAB-06840-U	18F23H0038	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0038
IAB-06840-U	18F23H0053	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0053
IAB-06840-U	18F23H0057	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23H0057
IAB-06840-U	18F23H0058	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0058
IAB-06840-U	18F23H0071	(01)10801902161946(17)250731(10)18F23H0071
IAB-06840-U	18F23H0075	(01)10801902172904(17)250731(10)18F23H0075
IAB-06840-U	18F23J0006	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0006
IAB-06840-U	18F23J0008	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0008
IAB-06840-U	18F23J0014	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0014
IAB-06840-U	18F23J0018	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0018
IAB-06840-U	18F23J0019	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0019
IAB-06840-U	18F23J0035	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0035
IAB-06840-U	18F23J0041	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0041
IAB-06840-U	18F23J0042	(01)10801902161946(17)250831(10)18F23J0042
IAB-06840-U	18F23J0050	(01)10801902172904(17)250831(10)18F23J0050
IAB-06840-U	18F23K0017	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0017
IAB-06840-U	18F23K0018	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0018
IAB-06840-U	18F23K0019	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0019
IAB-06840-U	18F23K0027	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0027
IAB-06840-U	18F23K0028	(01)10801902161946(17)250930(10)18F23K0028
IAB-06840-U	18F23K0040	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0040
IAB-06840-U	18F23K0045	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0045
IAB-06840-U	18F23K0057	(01)10801902172904(17)250930(10)18F23K0057
IAB-06840-U	18F23K0060	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23K0060
IAB-06840-U	18F23L0006	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0006
IAB-06840-U	18F23L0029	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0029
IAB-06840-U	18F23L0030	(01)10801902172904(17)251031(10)18F23L0030
IAB-06840-U	18F23M0019	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0019
IAB-06840-U	18F23M0020	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0020
IAB-06840-U	18F23M0037	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0037
IAB-06840-U	18F23M0039	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0039
IAB-06840-U	18F23M0040	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0040

Dodatek 2: EIF-000561 - Koda izdelka, številka serije, informacije o enolični identifikaciji pripomočka (UDI)

Koda izdelka	Številka serije	Edinstveni identifikator pripomočka (UDI)
IAB-06840-U	18F23M0041	(01)10801902172904(17)251130(10)18F23M0041
IAB-06840-U	18F23M0064	(01)10801902172904(17)251231(10)18F23M0064
IAB-06840-U	18F23M0065	(01)10801902172904(17)251231(10)18F23M0065
IAB-06840-U	18F24A0002	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0002
IAB-06840-U	18F24A0003	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0003
IAB-06840-U	18F24A0004	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0004
IAB-06840-U	18F24A0005	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0005
IAB-06840-U	18F24A0014	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0014
IAB-06840-U	18F24A0016	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0016
IAB-06840-U	18F24A0022	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0022
IAB-06840-U	18F24A0023	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0023
IAB-06840-U	18F24A0024	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0024
IAB-06840-U	18F24A0038	(01)10801902172904(17)251231(10)18F24A0038
IAB-06840-U	18F24B0006	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0006
IAB-06840-U	18F24B0007	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0007
IAB-06840-U	18F24B0023	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0023
IAB-06840-U	18F24B0024	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0024
IAB-06840-U	18F24B0025	(01)10801902161946(17)260131(10)18F24B0025
IAB-06840-U	18F24B0026	(01)10801902161946(17)260131(10)18F24B0026
IAB-06840-U	18F24B0027	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0027
IAB-06840-U	18F24B0028	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0028
IAB-06840-U	18F24B0045	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0045
IAB-06840-U	18F24B0046	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0046
IAB-06840-U	18F24B0047	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0047
IAB-06840-U	18F24B0067	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0067
IAB-06840-U	18F24B0068	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0068
IAB-06840-U	18F24B0069	(01)10801902172904(17)260131(10)18F24B0069
IAB-06840-U	18F24B0070	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0070
IAB-06840-U	18F24B0071	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24B0071
IAB-06840-U	18F24C0006	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0006
IAB-06840-U	18F24C0007	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0007
IAB-06840-U	18F24C0028	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0028
IAB-06840-U	18F24C0029	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0029
IAB-06840-U	18F24C0030	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0030
IAB-06840-U	18F24C0038	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0038
IAB-06840-U	18F24C0092	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0092
IAB-06840-U	18F24C0120	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0120
IAB-06840-U	18F24C0121	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0121
IAB-06840-U	18F24C0141	(01)10801902172904(17)260228(10)18F24C0141
IAB-06840-U	18F24C0151	(01)10801902161946(17)260228(10)18F24C0151
IAB-06840-U	18F24C0171	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0171
IAB-06840-U	18F24C0177	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0177
IAB-06840-U	18F24C0178	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0178
IAB-06840-U	18F24C0179	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0179
IAB-06840-U	18F24C0180	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0180
IAB-06840-U	18F24C0195	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24C0195
IAB-06840-U	18F24D0014	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0014
IAB-06840-U	18F24D0017	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0017

Dodatek 2: EIF-000561 - Koda izdelka, številka serije, informacije o enolični identifikaciji pripomočka (UDI)

Koda izdelka	Številka serije	Edinstveni identifikator pripomočka (UDI)
IAB-06840-U	18F24D0030	(01)10801902161946(17)260331(10)18F24D0030
IAB-06840-U	18R23G0002	(01)10801902172904(17)250331(10)18R23G0002
IAB-06850-U	18F22J0020	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0020(13)220916
IAB-06850-U	18F22J0038	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0038(13)220928
IAB-06850-U	18F22J0043	(01)10801902144192(17)240831(10)18F22J0043(13)220930
IAB-06850-U	18F22K0001	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0001(13)221003
IAB-06850-U	18F22K0003	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0003(13)221004
IAB-06850-U	18F22K0006	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0006(13)221006
IAB-06850-U	18F22K0011	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0011(13)221007
IAB-06850-U	18F22K0012	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0012(13)221007
IAB-06850-U	18F22K0013	(01)10801902144192(17)240930(10)18F22K0013(13)221007
IAB-06850-U	18F23A0075	(01)10801902144192(17)241231(10)18F23A0075(13)230131
IAB-06850-U	18F23B0005	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0005(13)230203
IAB-06850-U	18F23B0010	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0010(13)230206
IAB-06850-U	18F23B0029	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0029(13)230220
IAB-06850-U	18F23B0030	(01)10801902144192(17)250131(10)18F23B0030(13)230220
IAB-06850-U	18F23C0007	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0007(13)230307
IAB-06850-U	18F23C0008	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0008(13)230307
IAB-06850-U	18F23C0014	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0014(13)230310
IAB-06850-U	18F23C0015	(01)10801902144192(17)250228(10)18F23C0015(13)230310
IAB-06850-U	18F23F0016	(01)10801902144192(17)250531(10)18F23F0016(13)230609
IAB-06850-U	18F23F0017	(01)10801902144192(17)250531(10)18F23F0017(13)230609
IAB-06850-U	18F23H0061	(01)10801902172911(17)250831(10)18F23H0061(13)230911
IAB-06850-U	18F23J0043	(01)10801902144192(17)250831(10)18F23J0043(13)230921
IAB-06850-U	18F23J0044	(01)10801902144192(17)250831(10)18F23J0044(13)230923
IAB-06850-U	18F23J0078	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23J0078(13)231031
IAB-06850-U	18F23K0015	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23K0015(13)231031
IAB-06850-U	18F23K0024	(01)10801902144192(17)250930(10)18F23K0024(13)231014
IAB-06850-U	18F23L0045	(01)10801902144192(17)251031(10)18F23L0045(13)231130
IAB-06850-U	18F23L0052	(01)10801902144192(17)251130(10)18F23L0052(13)231205
IAB-06850-U	18F23L0058	(01)10801902144192(17)251130(10)18F23L0058(13)231205
IAB-06850-U	18F24B0010	(01)10801902172911(17)260131(10)18F24B0010(13)240207
IAB-06850-U	18F24B0011	(01)10801902144192(17)260131(10)18F24B0011(13)240209
IAB-06850-U	18F24B0012	(01)10801902144192(17)260131(10)18F24B0012(13)240209

-Konec dokumenta-