

V vednost odgovorni osebi za vigilanco  
medicinskih pripomočkov/centralni lekarni /  
Centralni sterilizacijski oddelek

Saint Priest, 11. junija 2026

## **NUJNO – OBVESTILO O VARNOSTNEM KOREKTIVNEM UKREPU Sistem kirurških retraktorjev Integra® Omni-Tract®**

### **Zakoniti proizvajalec:**

Integra Lifesciences Corporation  
4900 Charlemar Drive, Building A – Cincinnati, Ohio 45227, ZDA

### **Predstavnik v ES:**

Integra Lifesciences Services (France) SAS – Immeuble Séquoia 2 – 97 Allée Alexandre Borodine –  
69800 Saint Priest, Francija – Enotna registrska številka (SRN): FR-AR-000002474

### **Medicinski pripomoček:**

Sistem kirurških retraktorjev Integra® Omni-Tract je retraktorski sistem, nameščen na mizo, ki se uporablja za zagotavljanje stabilne retrakcije med invazivno kirurgijo s sprednjim pristopom za začasno odmikanje tkiv in organov, da se omogoči neovirana neposredna vizualizacija ciljnih tkiv in organov, vključno s hrbtenico.

### **Primarni klinični namen pripomočka:**

Retraktorji Integra® Omni-Tract®, ki se namestijo na mizo, so namenjeni zagotavljanju stabilne retrakcije med invazivnim kirurškim posegom, kar omogoča začasno retrakcijo in neposredno vizualizacijo ciljnih tkiv in organov.

### **Zadevne reference:**

Izdelki, na katere se to nanaša, so navedeni v prilogi 2.

Cenjena stranka družbe Integra,

Družba Integra LifeSciences izdaja popravek k obstoječim navodilom za uporabo za sistem kirurških retraktorjev Integra® Omni-Tract® v zvezi z zahtevami glede časa sušenja pri predvakuumski sterilizaciji, da se zagotovi ustrezno sušenje pripomočkov in komponent Integra® Omni-Tract® med sterilizacijo za izpolnjevanje veljavnih standardov ISO.

V trenutnih navodilih za uporabo sistema kirurškega retraktorja Integra® Omni-Tract® je naveden čas sušenja 30 minut. Validirani časi sušenja z uporabo standardnih temperaturnih in časovnih parametrov za predvakuum so bili znatno daljši in jih je bilo treba podaljšati na 90 minut, 110 minut ali 120 minut, odvisno od uporabljenega časa izpostavljenosti v sterilizacijskem ciklu (glejte preglednico 2).

**Preglednica 1: Podatki o distribuciji izdelka**

<b>Številka izdelka proizvajalca (kataloška številka)</b>	<b>Ime izdelka (opis)</b>	<b>Številka UDI</b>	<b>Številka serije</b>
Glejte priloženi seznam (priloga 2)	Sistem kirurških retraktorjev Integra® Omni-Tract®	Glejte priloženi seznam	Vse številke serije

## Tveganje za zdravje:

Preostala vlaga lahko poveča tveganje za ogrožitev sterilne pregrade, kar vodi do prenosa kontaminacije. To lahko privede do uporabe nesterilnih in/ali neočiščenih/kontaminiranih pripomočkov pri posegu. Škodljivi učinki so lahko okužba, neželena reakcija tkiva ali vnetje. Do danes nismo prejeli nobenih pritožb ali poročil o neželenih dogodkih.

Naše evidence kažejo, da ste uporabnik izdelka, zato prosimo, da izvedete naslednje ukrepe, kot so podrobno opisani v nadaljevanju, in da izpolnite obrazec za potrditev prejema, ki je priložen v **prilogi 1**, ter ga vrnete družbi Integra LifeSciences.

### Ukrepi, ki jih morajo izvesti stranke/zdravstvene ustanove:

1. Če je vaša ustanova validirala lasten postopek sterilizacije, se lahko po lastni presoji odločite za uporabo svojega validiranega postopka, pri čemer upoštevajte, da je družba Integra LifeSciences validirala le spodaj navedeni postopek sterilizacije.
2. Če uporabljate metodo gravitacijske sterilizacije, jo takoj prenehajte uporabljati.
3. Navodila v trenutnih navodilih za uporabo (40-9015 rev BAA in 40-6008 rev AAA) v razdelkih »sterilizacija« zamenjajte z naslednjimi:

#### **Sterilizacija:**

Po ustreznem čiščenju in pred sterilizacijo uporabite ustrezno sterilizacijsko ovojnino s sterilizacijskim pladnjem, da zagotovite, da se sestavni deli in pripomočki med prevozom do sterilizatorja in iz njega ne poškodujejo.

**OPOMBA:** Validacija je bila opravljena z uporabo ovitega sterilizacijskega pladnja in ne toge posode.

#### **Metoda parne sterilizacije:**

Postopki validacije procesa so bili izvedeni v skladu s standardi ANSI/AAMI ST79 za predvakuum. Parna sterilizacija je validirana metoda za sterilizacijo izdelkov Integra® Omni-Tract® v ovitem pladnju. Nobene druge metode niso bile validirane in odobrene za uporabo z izdelki Integra® Omni-Tract.

**OPOMBA:** Instrumenti bodo ne glede na uporabljeni sterilizacijski cikel ostali prevroči za takojšnjo uporabo. Pred uporabo zagotovite zadosten čas sušenja in ohlajanja.

**Predvakuum:** Uporabite enega od predvakuumskih sterilizacijskih ciklov, navedenih v **preglednici 2**, da zagotovite ustrezno sterilizacijo sistemov kirurških retraktorjev Integra® Omni-Tract® po uporabi.

**Preglednica 2: Parametri cikla prevakuumske sterilizacije**

Vrsta cikla	Temperatura	Čas izpostavljenosti	Čas sušenja (najkrajši)
Predvakuum	270 °F (132 °C)	4 minute	<b>90 minut</b>
Predvakuum	273 °F (134 °C)	3 minute	<b>110 minut</b>
Predvakuum	273 °F (134 °C)	18 minut	<b>120 minut</b>

4. Izpolnite obrazec za potrditev prejema v prilogi 1 in ga vrnete družbi Integra LifeSciences. Prejem tega obrazca potrjuje, da je družba Integra dosegla določeno stopnjo učinkovitosti pri obveščanju o teh informacijah.
5. Razpoložljivost posodobljenih navodil za uporabo: Pridobite posodobljena navodila za uporabo na spodnji povezavi:


(OPOMBA: POSODOBLJENA NAVODILA ZA UPORABO BODO NA VOLJO NA ZGORAJ NAVEDENI SPLETNI STRANI 17. 7. 2026)

<https://labeling.integralife.com/eifu/>

1. Izberite ustrezno državo in jezik
2. V polje »iskalni niz« vnesite »Integra® Omni-tract«
3. Kliknite ikono povečevalnega stekla za iskanje navodil za uporabo

● Search Term

Omni-Tract

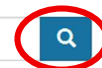

**Medtem upoštevajte navodila v tem obvestilu o varnostnem ukrepu.**

Priporočamo, da kopijo obrazca obdržite za svojo evidenco. Na podlagi prejema tega obrazca družba Integra preverja, ali je dosegla ustrezno stopnjo učinkovitosti pri posredovanju teh informacij.

Nacionalni pristojni organi lahko izvajajo revizije tovrstnih korektivnih ukrepov, da preverijo, ali so bile naše stranke obveščene in razumejo naravo izvedenega korektivnega ukrepa.

O tem obvestilu o varnostnem korektivnem ukrepu je bil obveščen pristojni nacionalni organ v vaši državi.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje pri tem varnostnem korektivnem ukrepu in za vračilo priloženega obrazca za odgovor.

**Upoštevajte, da bo vsebina tega obvestila o varnostnem korektivnem ukrepu dodana v obliki dopisa k vsakemu izdelku, ki bo odpremljen po naročilu od junija 2026 dalje, dokler izdelki ne bodo vsebovali posodobljenih navodil za uporabo in dokler v vaši državi po potrebi ne bodo prejeta ustrezna soglasja.**

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na naš oddelek za poprodajni nadzor na naslov [emea-fsca@integralife.com](mailto:emea-fsca@integralife.com). Cenimo vašo pomoč in se vam zahvaljujemo za nadaljnje sodelovanje.

S spoštovanjem,  
Oddelek za poprodajni nadzor

**Priloga 1:** Obrazec za odgovor na varnostno obvestilo o varnostnem ukrepu (za stranko)

**Dodatek 2:** Zadevni izdelki

## OBRAZEC ZA ODGOVOR STRANKE

<b>1. Informacije o obvestilu o varnostnem korektivnem ukrepu (FSN)</b>	
Referenčna številka FSN	<b>FSN-2026-HHE-004_005</b>
Datum obvestila o varnostnem korektivnem ukrepu (FSN)	11. 6. 2026
Ime pripomočka	Kirurški retraktor Omni-Tract®
Koda izdelka	Glejte prilogo 2
<b>2. Podrobnosti za stranke</b>	
Številka računa	
Ime zdravstvene organizacije*	
Naslov organizacije*	
Oddelek/enota	
Naslov za pošiljanje, če se razlikuje od zgoraj navedenega	
Kontaktno ime*	
Naziv ali funkcija	
Telefonska številka*	
E-pošta*	
<b>3. Ukrep stranke, izveden v imenu zdravstvene organizacije</b>	
<input type="checkbox"/>	Potrjujem, da sem prejel/-a obvestilo o varnostnem korektivnem ukrepu ter da sem prebral/-a in razumel/-a njegovo vsebino.
<input type="checkbox"/>	Izvedel/-a sem vse ukrepe, navedene v obvestilu o varnostnem korektivnem ukrepu.
<input type="checkbox"/>	Z informacijami in zahtevanimi ukrepi so bili seznanjeni vsi ustrezni uporabniki, ki so te ukrepe tudi izvedli.
<input type="checkbox"/>	<u>Nimamo</u> zadevnih enot.
Ime z velikimi tiskanimi črkami*	
Podpis*	
Datum*	
<b>4. Vračilo potrdila pošiljatelju</b>	
E-pošta	<a href="mailto:emea-fsca@integralife.com">emea-fsca@integralife.com</a>
Telefonska številka za pomoč za distributerje	+33 (0) 6 30 20 69 66
Poštni naslov	Oddelek za poprodajni nadzor Integra Immeuble Séquoia 2 – 97 allée Alexandre Borodine Parc technologique de la Porte des Alpes, 69800 Saint Priest, Francija
Spletni portal	<a href="https://integralife.com">https://integralife.com</a>
Rok za vračilo obrazca za odgovor stranke*	07. 7. 2026

Obvezna polja so označena s simbolom \*.

Pomembno je, da vaša organizacija izvede ukrepe, opisane v obvestilu o varnostnem korektivnem ukrepu, in potrdi, da je prejela obvestilo o varnostnem korektivnem ukrepu. Odgovor vaše organizacije je dokazilo, ki ga potrebujemo za spremljanje napredka korektivnega ukrepa.

**DODATEK 2: Zadevni izdelki**

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
3055	Sklop stebrička, enojni sklep	10381780268505
3069	Sklop gredi držala lopatice, 9 palcev (22,9 cm)	10381780268512
3076	Sklop prečne palice, standardni	10381780268529
3092	Rezilo za jetra Doherty GH, 4-1/4 palca x 3 palce (10,8 cm x 7,6 cm) z odprtino 3/8 palca (1,0 cm)	10381780268550
3093	Rezilo za jetra Lechner-Harrington, 5 palcev x 3-1/2 palca (12,7 cm x 8,9 cm) z odprtino 3/8 palca (1,0 cm)	10381780268567
3096	Fiksni retraktor Mayo, 2-3/4 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780268581
3098	Vrtljivo rezilo za ograjo, 4 palce x 6 palcev (10,2 cm x 15,2 cm) z odprtino 3/8 palca (1,0 cm)	10381780268598
3099	Fiksni splanhnični retraktor, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780268604
3137	Vrtljivo rezilo Finger Fence z odprtino 3/8 palca (1,0 cm)	10381780268697
3142	Široko vrtljivo rezilo Mayo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 3,5 palca x 2,75 palca (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780268710
3146	Modificiran fiksni retraktor Kelly, 3 palce x 3,5 palca (7,6 cm x 8,9 cm)	10381780268734
3148	Modificiran fiksni retraktor Kelly, 3 palce x 4 1/2 palca (7,6 cm x 11,4 cm)	10381780268758
3176	Široko, globoko vrtljivo rezilo Mayo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 3,5 palca x 4 palce (8,9 cm x 10,2 cm)	10381780268826
3177	Sklop ročice držala rezila, mikronastavljiv	10381780268833
3185	Fiksni retraktor Deaver, 1 palec x 5 palcev (2,5 cm x 12,7 cm)	10381780268857
3201	Splanhnični fiksni retraktor, 2 palca x 4-1/2 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780268871
3203	Fiksni retraktor za ledvično veno, 1 palec x 4,5 palca (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780268888
3216	Vrtljivo rezilo za ledvično veno z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1 palec x 4,5 palca (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780268895
3217	Vrtljivo rezilo za ledvično veno z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780268901
3218	Vrtljivo splanhnično rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2 palca x 4,5 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780268918
3219	Vrtljivo rezilo za splanhnično veno z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780268925
3220	Vrtljivi retraktor Richardson, 1,5 palca x 1,5 palca (3,8 cm x 3,8 cm)	10381780268932
3274	Fiksni retraktor Deaver, 1,5 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780268994
3335	Vrtljivi retraktor Mayo, 2-3/4 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269045
3336	Mini retraktor Mayo, 2,75 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269052
3342	Retraktor z zobmi, 7/8 palca x 1/2 palca (2,2 cm x 1,3 cm), ukrivljen, mini	10381780269076
3343	Vrtljivi retraktor Richardson, 1 palec x 2 palca (2,5 cm x 5,1 cm), mini	10381780269083
3398	Fiksni retraktor Harrington, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269212
3424	Komplet pladnja in pokrova za sterilizator, 12 palcev x 18 palcev (30,5 cm x 45,7 cm)	10381780269243
3426	Aluminijast vrtljivi retraktor za ledvično veno, 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780269250
3483	Mini vrtljivi retraktor Mayo, 2 palca x 2 palca (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780269267
3485	Mini vrtljivi retraktor Mayo, 2-3/4 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780269274
3520	Komplet za popravilo tesnilnega obročka, zunanji premer 0,50 palca x premer 0,070 palca (zunanji premer 1,3 cm x premer 0,02 cm)	10381780282273
3529	Splanhnični retraktor, 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780269281
3530	Fiksni retraktor za ledvično veno, 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780269298
3531	Retraktor Deaver, 2-3/4 palca x 8 palcev (7,0 cm x 20,3 cm)	10381780269304
3532	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780269311
3533	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 3 palci x 8 palcev (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780269328
3534	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 4 x 8 palcev (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780269335
3535	Vrtljivo rezilo Fence z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 4 x 8 palcev (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780269342

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
3536	Vrtljivi retraktor Mayo, 3,5 palca x 2,75 palca (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780269359
3537	Upogljivo vrtljivo rezilo Marshall za prostato z odprtino 3/8 palca (1,0 cm)	10381780269366
3555	Sterilna večnamenska objemka za stebriček, 0,75 palca x 0,50 palca (1,8 cm x 1,3 cm)	10381780269373
3557	Varjeni sklop ročice, 0,375 palca (1,0 cm)	10381780269380
3565	Mini krožna objemka, enodelna	10381780269397
3570	Polmesečni okvir z roko, enodelni, mini	10381780269403
3575	Sklop Wishbone, fiksni	10381780269410
3586	Sklop krožne objemke	10381780269427
3588	Zglobna podaljševalna roka	10381780269434
3590	Vrtljivi retraktor za dimlje, 1-1/2 palca x 3-1/2 palca (3,8 cm x 8,9 cm)	10381780269441
3592	Upogljivo vrtljivo rezilo z zarezami, z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2 palca x 6-1/2 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780269458
3593	Upogljivo vrtljivo rezilo z zarezami, z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 3 palca x 6-1/2 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780269465
3594	Retraktor Richardson Stoney 3/4 palca x 2-1/2 palca (1,9 cm x 6,4 cm) z mikro nastavitvijo	10381780269472
3595	Hitra objemka, enodelna	10381780269489
3596	Vrtljivo rezilo Harrington Sweetheart z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269496
3597	Vrtljivo rezilo Harrington Sweetheart z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2,5 palca x 7 palcev (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269502
3601	Vrtljivo rezilo Splanchnic z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1,5 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269519
3602	Vrtljivo splahnhično rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1,5 palca x 4 palce (3,8 cm x 10,2 cm)	10381780269526
3605	Prilagodljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 0,75 palca x 4 palce (1,9 cm x 10,2 cm)	10381780269557
3610	Sklop objemke in bloka	10381780269564
3614	Vrtljivi retraktor Mayo, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm), mini	10381780269571
3616	Upogljivi vrtljivi retraktor, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm), mini	10381780269588
3618	Upogljivi vrtljivi retraktor, 1/2 palca x 1 palec (1,3 cm x 2,5 cm), mini	10381780269595
3620	Vrtljivi retraktor Mayo, 2 palca x 1-1/2 palca (5,1 cm x 3,8 cm), mini	10381780269601
3622	Držalo za rezilo z gumbom 3626, 6 palcev (15,2 cm)	10381780269618
3623	Držalo za rezilo z gumbom 3626, 9 palcev (22,9 cm)	10381780269625
3626	Gumb za držalo vrtljivega rezila	10381780269649
3630	Gumb za mikronastavitev	10381780269656
3631	Sklop sornika, I.M.A. Objemka	10381780269663
3635	I.M.A. Objemka za vodilo	10381780269670
3640	Upognjen stebriček, I.M.A.	10381780269687
3647	T-stebriček s sklopi objemk, nastavljiv	10381780269694
3650	I.M.A. Sklop z zobmi, topi zobje, kvadraten	10381780269700
3700	Večnamenske objemke za stebriček za sterilno polje, 15-3/4 palca (40,0 cm)	10381780269717
3720	Objemka Lapo (držalo za endoskop) 5,0 mm/10,0 mm	10381780269724
3732	Kotna ročica	10381780269731
3740	Upogibna objemka	10381780269748
3759	Kotna stranska ročica, 8 palcev x 18 palcev (20,3 cm x 45,7 cm)	10381780269755
3761	Sklop vrtljivega gumba, večnamenska objemka	10381780269762
3765	I.M.A. Sklop z zobmi, ostri zobje, ukrivljen	10381780269786
3772	Vrtljivi retraktor Fence, 4 palce x 6 palcev (10,2 cm x 15,2 cm)	10381780269793
3774	Splanhnični vrtljivi retraktor, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780269809
3780	Enodelna majhna hitra objemka	10381780269816
3782	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780269823
3784	Vrtljivi retraktor Deaver, 2-3/4 palca x 4-1/2 palca (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780269830
3786	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780269847

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
3788	Upogljiv vrtljivi retraktor z režami, 2 palca x 6-1/2 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780269854
3790	Upogljiv vrtljivi retraktor z režami, 3 palci x 6-1/2 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780269861
3792	Upogljiv vrtljivi retraktor za mehur Marshall, 3 palci x 6 palcev (7,6 cm x 15,2 cm)	10381780269878
3794	Vrtljivi retraktor Harrington Sweetheart, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780269885
3796	Vrtljivi retraktor Harrington Sweetheart, 2-1/2 palca x 7 palcev (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269892
3798	Vrtljivi splahnčni retraktor, 1-1/2 palca x 4 palce (3,8 cm x 10,2 cm)	10381780269908
3800	Vrtljivi splahnčni retraktor, 1-1/2 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269915
3812	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm) Mini	10381780269960
3814	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1 palec x 5 palcev (2,5 cm x 12,7 cm) Mini	10381780269977
3816	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm), mini	10381780269984
3824	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm), mini	10381780270027
3848	Vrtljivi retraktor Deaver, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270041
3860	Posterorni vrtljivi retraktor, 1-3/4 palca x 4 palci (4,5 cm x 10,2 cm)	10381780270089
3862	Modificirani vrtljivi retraktor Kelly, 3 palci x 2-1/2 palca (7,6 cm x 6,4 cm)	10381780270096
3864	Modificiran vrtljivi retraktor Kelly, 3 palci x 4 palci (7,6 cm x 10,2 cm)	10381780270102
3870	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 7 palcev (3,8 cm x 17,8 cm)	10381780270133
3872	Upogljiv vrtljivi retraktor, 2 palca x 6-1/2 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780270140
3874	Upogljiv vrtljivi retraktor, 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780270157
3886	Vrtljivi splahnčni retraktor, 1-1/2 palca x 3-1/2 palca (3,8 cm x 8,9 cm), MINI	10381780270218
3888	Vrtljivi splahnčni retraktor, 2 palca x 4-1/2 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270225
3890	Sestav držala za instrumente	10381780270232
3892	Vrtljivi retraktor Fence, 4 palce x 5 palcev (10,2 cm x 12,7 cm)	10381780270249
3900	Lapo-Clamp II (držalo instrumentov)	10381780270256
3909	Vrtljivi retraktor Kelly, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780270294
3910	Držalo za rezilo FastSnap	10381780270300
3911	Upogljiv vrtljivi retraktor z režami, 1,5 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270317
3914	Retraktor Cloward, 0,5 palca x 3 palce (1,3 cm x 7,6 cm)	10381780270324
3915	Koničasti retraktor Cloward, 0,75 palca x 1,25 palca (1,9 cm x 3,2 cm)	10381780270331
3916	Koničasti retraktor Cloward, 0,75 palca x 1,5 palca (1,9 cm x 3,8 cm)	10381780270348
3917	Lateralni retraktor z robom, 0,75 palca x 2 palca (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780270355
3918	Lateralni retraktor z robom, 1 palec x 2 palca (2,5 cm x 5,1 cm)	10381780270362
3919	Lateralni retraktor z robom, 1 palec x 3 palci (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780270379
3921	Medialni retraktor, 1,25 palca x 2,75 palca (3,2 cm x 7,0 cm)	10381780270386
3922	Medialni retraktor, 1,5 palca x 2,75 palca (3,8 cm x 7,0 cm)	10381780270393
3923	Medialni retraktor, 1,5 palca x 3,5 palca (3,8 cm x 8,9 cm)	10381780270409
3924	Submandibularni upogljiv retraktor, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270416
3925	Submandibularno upogljivo rezilo, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780270423
3926	Retraktor Meyerding, topi, 1 palec x 3 palci (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780270430
3927	Retraktor Meyerding, topi, 2 palca x 2,5 palca (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270447
3928	Retraktor Meyerding, topi, 2 palca x 3 palci (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780270454
3929	Retraktor Richardson, 3/4 palca x 2 palca (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780270461
3931	Modificiran retraktor Meyerding, desni	10381780270478
3932	Modificiran retraktor Meyerding, levi	10381780270485
3974	Vrtljivi retraktor Mayo, aluminij, 2-3/4 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780270492
3975	Vrtilni pripomoček Mayo, retraktor, aluminij, 3-1/2 palca x 2 palca (8,9 cm x 5,1 cm)	10381780270508
3976	Vrtilni pripomoček Fence, retraktor, aluminij, 4 palci x 6 palcev (10,2 cm x 15,2 cm)	10381780270515
3977	Splanhični vrtljivi retraktor, aluminij, 2 palca x 4-1/2 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270522
3978	Splanhični vrtljivi retraktor, aluminij, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780270539
3979	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, aluminij, 1 x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780270546
3980	Vrtljivi retraktor Deaver, aluminij, 2-3/4 x 4-1/2 palca (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780270553
3981	Upogljiv vrtljivi retraktor, aluminij, 2 palca x 6-1/2 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780270560

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
3983	Vrtljivi retraktor Harrington Sweetheart, aluminij, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270584
4017	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, aluminij, 1 palec x 4-1/2 palca (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270591
4019	Splahnhični vrtljivi retraktor, aluminij, 1-1/2 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270614
4020	Standardni sklop Wishbone, nastavljiv s kotno ročico	10381780270621
4040	Sklop SnapClamp	10381780270638
4070	Omni-Ring, okrogel, 12 palcev (30,5 cm) z roko	10381780270645
4080	Steber za sterilno polje Fast System	10381780270652
4090	Omni-Ring, 12 palcev x 18 palcev (30,5 cm x 45,7 cm), ovalen	10381780270669
4547	Univerzalna objemka za vodilo	10381780270683
4571	Steber za sterilno polje, retraktor za kolk	10381780270690
4592	Retraktor za kolk Mueller, 1 palec x 2,5 palca (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780270706
4593	Retraktor za kolk Muller, 1 palec x 3,5 palca (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780270713
4594	Retraktor za kolk Muller, 1 palec x 4,5 palca (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270720
4595	Retraktor za kolk Muller, 1 palec x 5,5 palca (2,5 cm x 14,0 cm)	10381780270744
4597	Retraktor za kolk Muller, 2 palca x 3,5 palca (5,1 cm x 8,9 cm)	10381780270768
4598	Retraktor za kolk Mulier, 2 palca x 4,5 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270775
4599	Retraktor za kolk Mulier, 2 palca x 5,5 palca (5,1 cm x 14,0 cm)	10381780270782
4600	Retraktor za kolk Meyerding, 1 palec x 2,5 palca (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780270799
4601	Retraktor za kolk Meyerding, 1 palec x 3,5 palca (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780270805
4602	Retraktor za kolk Meyerding, 1 palec x 4,5 palca (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780270812
4604	Retraktor za kolk Meyerding, 2 palca x 2,5 palca (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270836
4605	Retraktor za kolk Meyerding, 2 palca x 3,5 palca (5,1 cm x 8,9 cm)	10381780270843
4606	Retraktor za kolk Meyerding, 2 palca x 4,5 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780270850
4607	Retraktor za kolk Meyerding, 2 palca x 5,5 palca (5,1 cm x 14,0 cm)	10381780270867
4621	Kostni kavelj, globina 4 palce (10,2 cm)	10381780270881
4622	Kostni kavelj, globina 5 palcev (12,7 cm)	10381780270898
4637	Vrtljivi prstni retraktor Fence, 2,63 palca x 6 palcev (6,7 cm x 15,2 cm)	10381780270904
4920	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, aluminij, 1 palec x 4 palce (2,5 cm x 10,2 cm), neupogljiv	10381780270911
4921	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, aluminij, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm), neupogljiv	10381780270928
4922	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, aluminij, 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,3 cm), neupogljiv	10381780270935
4927	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, nerjavno jeklo, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm), neupogljiv	10381780270942
4928	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, SS, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm), neupogljiv	10381780270959
4929	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, SS, 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,3 cm), neupogljiv	10381780270966
4932	Vrtljivo rezilo za ledvično veno, nerjavno jeklo, z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270980
4933	Vrtljivo rezilo za ledvično veno z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780270997
4935	Retraktor za ledvično veno, nerjavno jeklo, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm), fiksni	10381780271000
4936	Retraktor za ledvično veno, SS, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm), neupogljiv	10381780271017
4937	Retraktor za ledvično veno, SS, 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,2 cm), neupogljiv	10381780271024
4940	Pregibna prečna palica	10381780271031
4943	Prečna palica, BF-200	10381780271048
4944	Dvojna objemka za stebriček sterilnega polja	10381780271055
4950	Trak Arthro	10381780268413
4954	Sklop objemke Stoney Richardson	10381780271062
4956	Retraktor z mikronastavitvijo Stoney Richardson, 0,75 palca x 2,5 palca (1,9 cm x 6,4 cm)	10381780271079
4957	Vrtljivi retraktor z zobmi, 7/8 palca x 1 palec (2,2 cm x 2,5 cm), ukrivljen, majhen	10381780271086

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
4958	Vrtljivi retraktor z zobmi, 7/8 palca x 1/2 palca (2,2 cm x 1,3 cm), ukrivljen, majhen	10381780271093
4959	Vrtljivi retraktor Richardson, 3/4 palca x 1 palec (1,9 cm x 2,5 cm)	10381780271109
4960	Vrtljivi retraktor Richardson, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780271116
4961	Vrtljivi retraktor Richardson, 1 palec x 2 palca (2,5 cm x 5,1 cm), majhen	10381780271123
4962	Splanhnični vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 3-1/2 palca (3,8 cm x 8,9 cm), majhen	10381780271130
4963	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1/2 palca x 1 palec (1,3 cm x 2,5 cm), majhen	10381780271147
4964	Upogljiv vrtljivi retraktor, 3/4 palca x 2 palca (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780271154
4965	Upogljiv vrtljivi retraktor, 3/4 palca x 3 palci (1,9 cm x 7,6 cm)	10381780271161
4966	Upogljiv vrtljivi retraktor, 3/4 palca x 4 palci (1,9 cm x 10,2 cm), majhen	10381780271178
4967	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm), majhen	10381780271185
4968	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm), majhen	10381780271192
4969	Upogljivi vrtljivi retraktor, 1 palec x 5 palcev (2,5 cm x 12,7 cm), majhen	10381780271208
4970	Upogljivi vrtljivi retraktor, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm), majhen	10381780271215
4971	Upogljivi vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 3 palce (3,8 cm x 7,6 cm), majhen	10381780271222
4972	Upogljivi vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 4 palce (3,8 cm x 10,2 cm), majhen	10381780271239
4973	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 5 palcev (3,8 cm x 12,7 cm), majhen	10381780271246
4974	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm), majhen	10381780271253
4975	Posteriozni vrtljivi retraktor, 1-3/4 palca x 3 palci (4,4 cm x 7,6 cm), majhen	10381780271260
4976	Posteriozni vrtljivi retraktor, 1-3/4 palca x 4 palci (4,4 cm x 10,2 cm), majhen	10381780271277
4977	Sprednji vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 3 palci (3,8 cm x 7,6 cm), majhen	10381780271284
4978	Vrtljivi retraktor Mayo, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm), majhen	10381780271291
4979	Vrtljivi retraktor Mayo, 2 palca x 1-1/2 palca (5,1 cm x 3,8 cm), majhen	10381780271307
4980	Vrtljivi retraktor Mayo, 2 palca x 2 palca (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780271314
4981	Vrtljivi retraktor Mayo, 2-3/4 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm), majhen	10381780271321
4985	Sklop majhnega retraktorja v obliki vilične kosti	10381780271338
4988	Podaljševalna roka Fast-System, 20 palcev (50,8 cm)	10381780271345
10244	Stebriček za sterilno polje Omni-Flex	10381780271369
10269	Standardna roka okvirja Wishbone	10381780271376
10270	Roka majhnega okvirja Wishbone	10381780271383
10272	Sklop objemke s trakom	10381780268420
10385	Rezilo Hohman z dvojno konico	10381780271390
10386	Rezilo Hohman z enojno konico	10381780271406
10387	Rezilo PCL z dvojno konico	10381780271413
10388	Rezilo PCL z eno konico	10381780271420
10389	Topi zobje, globina 3/4 palca (1,9 cm)	10381780271437
10390	Topi zobje, globina 1,25 palca (3,2 cm)	10381780271444
10391	Topi zobje, globina 2-3/8 palca (6,0 cm)	10381780271451
10419	Sklop roke okvirja Cinch	10381780271475
11030	Sklop stranske hitre objemke	10381780271529
11050	Podporna roka Omni-Flex	10381780271550
11070	Podaljševalna roka, premer 0,75 palca (1,9 cm), dolžina 20 palcev (50,8 cm)	10381780271567
11119	SideSnap A.B.H.	10381780271574
11121	Zgibna podaljševalna roka, 19 palcev (48,3 cm)	10381780271581
11182	Nadomestni trakovi Omni-Flex, 12 palcev (30,5 cm), VREČKA Z 12 KOSI	10381780268437
11183	Nadomestni trakovi Omni-Flex, 27 palcev (68,6 cm), VREČKA Z 12 KOSI	10381780268444
11184	Podporna roka Speed-Tract	10381780271598
11275	Speed-Tract, spojka 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780271604
11306	Renalno radiolucentno rezilo, aluminij, 1 palec x 8 palcev (2,5 cm x 20,3 cm)	10381780271673
11308	Splanhnično radiolucentno rezilo, aluminij, 2 palca x 4,5 palca (5,1 cm x 11,4 cm)	10381780271680
11309	Radiolucentno splanhnično rezilo, aluminij, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780271697
11321	Speed-Tract, stebriček za sterilno polje, s spojko – 18 palcev (45,7 cm)	10381780271703
11340	GhostTract, držalo za kvadratna rezila	10381780271710

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
11352	Speed-Tract, stebriček za sterilno polje s spojko – 24 palcev (61,0 cm)	10381780271727
11355	Pladenj GHOSTRACT	10381780271734
11360	GHOSTRACT, sklop držala za okroglo rezilo	10381780271741
11382	Ravna prečka, Ø 0,500 palca x 29 palcev (1,3 cm x 73,7 cm)	10381780271758
11383	Sklop držala rezila, 24 palcev (61,0 cm)	10381780271765
11384	Sklop stebrička z enim zglobom, 30 palcev (76,2 cm)	10381780271772
11386	Občutljivo vrtljivo rezilo Mayo, 3,5 palca x 2,75 palca (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780271796
11402	Rezilo Harrington Sweetheart, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm), slog ABH	10381780271826
11406	Splanhnično rezilo, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm), slog ABH	10381780271864
11407	Splanhnično rezilo, 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm), slog ABH	10381780271871
11408	Sternalno rezilo, močno, 3 palce x 2,75 palca (7,6 cm x 7,0 cm), slog ABH	10381780271888
11409	Rezilo St. Mark's, 2,5 palca x 7 palcev (6,4 cm x 17,8 cm), slog ABH	10381780271895
11440	Vrtljivi retraktor Balfour, kvadratno steblo, 2,75 palca x 3,0 palca (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780271901
11441	Vrtljivi retraktor Harrington, kvadratno steblo, 2,5 palca x 7,0 palcev (6,3 cm x 17,8 cm)	10381780271918
11442	Vrtljivi retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 3 palci (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780271925
11443	Vrtljivi retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 4 palci (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780271932
11444	Vrtljivi retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780271949
11445	Vrtljivi retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780271956
11446	Upogljiv vrtljivi retraktor, kvadratno steblo, 1,5 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780271963
11447	Upogljiv vrtljivi retraktor, kvadratno steblo, 2 palca x 6,5 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780271970
11448	Upogljiv vrtljivi retraktor, kvadratno steblo, 3 palce x 6,5 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780271987
11480	Srednji okrogli obroč, lahek	10381780271994
11481	Srednji ovalni obroč, lahek	10381780272007
11482	Velik ovalni obroč, lahek	10381780272014
11490	Sklop kroglične zaskočke	10381780272021
11500	Zaskočni mehanizem, elevator za stegenico	10381780272038
11501	Sestav stegenične kljuke, 9 palcev (22,9 cm)	10381780272045
11510	Fiksni retraktor Balfour, kvadratno steblo, 2,75 palca x 3,0 palce (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780272069
11511	Fiksni retraktor Harrington, kvadratno steblo, 2,5 palca x 7,0 palcev (6,3 cm x 17,8 cm)	10381780272076
11512	Fiksni retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 3 palce (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780272083
11513	Fiksni retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 4 palce (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780272090
11514	Fiksni retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780272106
11515	Fiksni retraktor Kelly, kvadratno steblo, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780272113
11516	Upogljiv fiksni retraktor, kvadratno steblo, 1,5 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780272120
11517	Upogljiv fiksni retraktor, kvadratno držalo, 2 palca x 6,5 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780272137
11518	Upogljiv fiksni retraktor, kvadratno držalo, 3 palce x 6,5 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780272144
11560	Nagibna ročična objemka z integrirano čeljustjo	10381780272151
11627	Velik retraktor za jetra Nathanson	10381780272205
11628	Srednji retraktor za jetra Nathanson	10381780272212
11629	Majhen retraktor za jetra Nathanson	10381780272229
11631	Zelo majhen ovalni obroč 6 palcev x 7-3/4 palca (15,2 cm x 19,7 cm)	10381780272236
11632	Majhen ovalni obroč 8-1/2 palca x 12 palcev (21,6 cm x 30,5 cm)	10381780272243
11633	Majhen okrogel obroč 8-1/2 palca (21,6 cm)	10381780272250
11634	Velik okrogel obroč 12-1/2 palca (31,8 cm)	10381780272267
11635	Majhen segmentiran obroč	10381780272274
11639	Fiksni retraktor Kelly XXS, 2 palca x 1,5 palca (5,1 cm x 3,8 cm)	10381780272298
11640	Fiksni retraktor Kelly XS, 2 palca x 2,5 palca (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780272304
11641	Fiksni retraktor Kelly XXL, 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780272311
11642	Velik globok upogljiv fiksni retraktor, 3 palci x 8 palcev (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780272328
11644	Otroški retraktor Kelly, 1 palec x 1-1/2 palca (2,5 cm x 3,8 cm)	10381780272335
11645	Otroški retraktor Kelly, 1 palec x 2-1/2 palca (2,5 cm x 6,4 cm)	10381780272342

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
11646	Nagibna objemka z zaskočnico	10381780272359
11820	Upogljiv retraktor z zarezo, fiksni, 2 palca x 6 palcev (5,1 cm x 15,2 cm)	10381780272403
11821	Upogljiv retraktor z zarezo, fiksni, 2-1/2 palca x 7 palcev (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780272410
11822	Upogljiv retraktor z zarezo, fiksni, 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780272427
11826	Navpični podaljšek Speed-Tract, Ø 1 palec x 12 palcev (2,5 cm x 30,5 cm)	10381780272434
11848	Deljen okvir Speed-Tract, ovalen	10381780272472
11860	Pladenj in pokrov sterilizatorja, komplet rezil za anteriorni ledveni dostop	10381780282280
11861	Sestav okroglega obroča, dvojna roka	10381780272496
11863	Ledvični retraktor, aluminij, 1 palec x 3 palci (2,5 cm x 7,6 cm) A.B.H.	10381780272502
11864	Ledvični retraktor, aluminij, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm) A.B.H.	10381780272519
11865	Ledvični retraktor, aluminij, 1 palec x 5 palcev (2,5 cm x 12,7 cm) A.B.H.	10381780272526
11866	Ledvični retraktor, aluminij, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm) A.B.H.	10381780272533
11867	Ledvični retraktor, aluminij, 1 palec x 7 palcev (2,5 cm x 17,8 cm) A.B.H.	10381780272540
11868	Ledvični retraktor, aluminij, 1 in x 8 in (2,5 cm x 20,3 cm) A.B.H.	10381780272557
11875	Srednji segmentirani obroč	10381780272564
11880	Stebriček za sterilno polje Omni-Flex s sklopom torzijske objemke s stožčastim nastavkom	10381780272571
11902	Retraktor Balfour, otroški, 2,25 palca x 1,5 palca (5,7 cm x 3,8 cm)	10381780272595
11910	Standardna objemka za rezilo	10381780272625
11931	Majhen retraktor za jetra Nathanson s konico prijemalke Ø 0,375 palca (1,0 cm)	10381780272663
11932	Srednji retraktor Nathanson za jetra s konico prijemalke Ø 0,375 palca (1,0 cm)	10381780272670
11933	Veliki retraktor Nathanson za jetra s konico prijemalke Ø 0,375 palca (1,0 cm)	10381780272687
11936	Fiksni retraktor Richardson, 0,75 palca x 2 palca (1,9 cm x 5,1 cm)	10381780272694
11938	Upogljivi fiksni retraktor, 0,5 palca x 4 palce (1,3 cm x 10,2 cm)	10381780272700
11942	Fiksni retraktor Balfour, 3,5 palca x 2,75 palca (8,9 cm x 7,0 cm)	10381780272724
11944	Upogljiv fiksni retraktor, 2 palca x 10 palcev (5,1 cm x 25,4 cm)	10381780272731
11946	Upogljiv fiksni retraktor, 3 palci x 10 palcev (7,6 cm x 25,4 cm)	10381780272748
11948	Upogljiv fiksni retraktor, 4 palce x 8 palcev (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780272755
11952	Fiksni retraktor Harrington Sweetheart, 3,5 x 10,0 palca (8,9 x 25,4 cm)	10381780272779
11954	Fiksni retraktor Richardson, 0,75 palca x 1,0 palec (1,9 x 2,5 cm)	10381780272786
11956	Fiksni retraktor za ledvično veno, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780272793
11958	Vaginalni lateralni fiksni retraktor, 1 palec x 3 palci (2,5 cm x 7,6 cm)	10381780272809
11960	Vaginalni retraktor Deaver, majhen, 1 palec x 3,5 palca (2,5 cm x 8,9 cm)	10381780272816
11962	Vaginalni retraktor Deaver, velik, 1 palec x 5 palcev (2,54 cm x 12,7 cm)	10381780272823
11964	Vaginalni posteriorni retraktor, 1 palec x 4,5 palca (2,5 cm x 11,4 cm)	10381780272830
11966	Perinealni segmentni obroč, 8 palcev x 10-1/2 palca (20,3 cm x 26,7 cm)	10381780272847
11968	Perinealni togi obroč 8 palcev x 10-1/2 palca (20,3 cm x 26,7 cm)	10381780272854
10144R	Zglobno držalo rezila	10381780271352
11300R	Radiolucentno rezilo Deaver, aluminij, 2-3/4 palca x 4-1/2 palca (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780271611
11301R	Upogljivo radiolucentno rezilo, aluminij, 2 palca x 6-1/2 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780271628
11302R	Radiolucentno rezilo Mayo, aluminij, 2-3/4 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780271635
11304R	Radiolucentno ledvično rezilo, aluminij, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780271659
11305R	Radiolucentno ledvično rezilo, aluminij, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780271666
11400R	Rezilo Deaver, 2,75 palca x 4,5 palca (7,0 cm x 11,4 cm), slog ABH	10381780271802
11401R	Rezilo Fence, 4 palce x 6 palcev (10,2 cm x 15,2 cm), slog ABH	10381780271819
11403R	Upogljivo rezilo z utori, 2 palca x 6,5 palca (5,1 cm x 16,5 cm), slog ABH	10381780271833
11404R	Rezilo Mayo, 2,75 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm), slog ABH	10381780271840
11405R	Rezilo za ledvično veno, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm), slog ABH	10381780271857
11502R	Stebriček za sterilno polje in ročica dvigala za stegnenico	10381780272052
11610R	Pregibno držalo za rezilo z objemko SnapClamp	10381780272182
11904R	Retraktor Deaver, majhen, 0,75 palca x 3,0 palca (1,9 cm x 7,6 cm)	10381780272601
3030R	Sklop stebrička, z dvojnimi sklepom	10381780268451

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
3041R	Sklop matice ročaja, 3/8 palca (1,0 cm)	10381780268475
3044R	Varovalna podložka, 3/4 palca (1,9 cm)	10381780282266
3046R	Sestav gredi držala rezila, 6 palcev (15,2 cm)	10381780268482
3091R	Rezilo retraktorja Doherty-Harrington z odprtino 3/8 palca (1,0 cm)	10381780268543
3094R	Sternalni retraktor, 3 palce x 3 palce (7,6 cm x 7,6 cm)	10381780268574
3101R	Fiksni retraktor za ledvično veno, 1 palec x 6 palcev (2,5 cm x 15,2 cm)	10381780268611
3103R	Vrtljivi retraktor Richardson, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780268628
3104R	Vrtljivi retraktor Richardson, 3/4 palca x 1-1/2 palca (1,9 cm x 3,8 cm)	10381780268635
3105R	Vrtljivi retraktor Richardson, 1 palec x 1-1/2 palca (2,5 cm x 3,8 cm)	10381780268642
3120R	Kratek fiksni retraktor Deaver, 3 palci x 4 palci (7,6 cm x 10,2 cm)	10381780268659
3121R	Fiksni retraktor Deaver, 4 palci x 5,5 palca (10,4 cm x 14,0 cm)	10381780268666
3132R	Standardno vrtljivo rezilo Mayo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2,75 palca x 2 palca (7,0 cm x 5,1 cm)	10381780268673
3138R	Fiksni retraktor Deaver, 2,75 palca x 4,5 palca (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780268703
3145R	Fiksni retraktor Kelly Mod, 3 palci x 3 palci (7,6 cm x 7,6 cm)	10381780268727
3147R	Prilagojen Kellyjev retraktor, 3 palci x 4 palci (7,6 cm x 10,2 cm), fiksni	10381780268741
3150R	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 2 palca x 6,5 palca (5,1 cm x 16,5 cm)	10381780268765
3151R	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 3 palci x 6,5 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780268772
3152R	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 4 palci x 6,5 palca (10,2 cm x 16,5 cm)	10381780268789
3167R	Sklop rezila in ročice Stoney Richardson, 0,75 palca x 2,5 palca (1,9 cm x 6,4 cm)	10381780268796
3175R	Široki fiksni retraktor Mayo	10381780268819
3178R	Držalo za rezilo z mikronastavitvijo, komplet	10381780268840
3187R	Fiksni retraktor Deaver, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780268864
3222R	Vrtljivo rezilo Deaver, 2-3/4 palca x 4-1/2 palca (7,0 cm x 11,4 cm)	10381780268949
3223R	Vrtljivo rezilo Fence z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 4 palci x 5 palcev (10,2 cm x 12,7 cm)	10381780268956
3225R	Mini vrtljivi retraktor Richardson, 1 palec x 1 palec (2,5 cm x 2,5 cm)	10381780268963
3259R	I.M.A. Sklop z zobmi, topi zobje, ukrivljen	10381780268970
3281R	Retraktor z zobmi, 0,875 palca x 1 palec (2,2 cm x 2,5 cm), ukrivljen, mini	10381780269014
3341R	Vrtljivi retraktor Richardson, 3/4 palca x 1 palec (1,9 cm x 2,5 cm) Mini	10381780269069
3361R	Splanhični fiksni retraktor, 1,5 palca x 3,5 palca (3,8 cm x 8,9 cm), mini	10381780269090
3376R	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1,5 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780269137
3377R	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1,5 palca x 7 palcev (3,8 cm x 17,8 cm)	10381780269144
3379R	Sklop ročice držala rezila, 6 palcev (15,2 cm), mini	10381780269151
3394R	Upogljivo vrtljivo rezilo z odprtino 3/8 palca (1,0 cm), 1 palec x 7 palcev (2,5 cm x 17,8 cm)	10381780269199
3397R	Vrtljivi retraktor Mayo, 3-1/2 palca x 2 palca (8,9 cm x 5,1 cm)	10381780269205
3399R	Fiksni retraktor Harrington, 2,5 palca x 7 palcev (6,4 cm x 17,8 cm)	10381780269229
3422R	Komplet pladnja in pokrova za sterilizator, 12,5 palca x 26,5 palca (31,8 cm x 67,3 cm)	10381780269236
3804R	Anteriorni vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 3 palce (3,8 cm x 7,6 cm) Mini	10381780269922
3806R	Upogljivi vrtljivi retraktor, 3/4 palca x 2 palca (1,9 cm x 5,1 cm), mini	10381780269939
3808R	Upogljivi vrtljivi retraktor, 3/4 palca x 3 palce (1,9 cm x 7,6 cm), mini	10381780269946
3810R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 3/4 palca x 4 palca (1,9 cm x 10,2 cm), mini	10381780269953
3818R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 3 palci (3,8 cm x 7,6 cm), mini	10381780269991
3820R	Upogljivi vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 4 palci (3,8 cm x 10,2 cm), mini	10381780270003
3822R	Upogljivi vrtljivi retraktor, 1-1/2 palca x 5 palcev (3,8 cm x 12,7 cm), mini	10381780270010
3854R	Vrtljivi retraktor Deaver, 1-1/2 palca x 6 palcev (3,8 cm x 15,2 cm)	10381780270065
3856R	Vrtljivi retraktor Fence, 4 palce x 8 palcev (10,2 cm x 20,3 cm)	10381780270058
3858R	Posteriorni vrtljivi retraktor, 1-3/4 palca x 3 palci (4,5 cm x 7,6 cm)	10381780270072

SKU	Ime in opis izdelka	UDI
3866R	Vrtljivi retraktor Mayo, 2-3/4 palca x 3 palci (7,0 cm x 7,6 cm)	10381780270119
3868R	Vrtljivi retraktor Mayo, 3-1/2 palca x 4 palci (8,4 cm x 10,2 cm)	10381780270126
3876R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 3 palci x 6-1/2 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780270164
3878R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 3 palce x 8 palcev (7,6 cm x 20,3 cm)	10381780270171
3880R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 4 palci x 6-1/2 palca (10,2 cm x 16,5 cm)	10381780270188
3882R	Upogljiv vrtljivi retraktor, 10,2 cm x 20,3 cm (4 palci x 8 palcev)	10381780270195
3883R	Vrtljivi retraktor Mayo, 2 palca x 2 palca (5,1 cm x 5,1 cm)	10381780270201
3906R	Vrtljivi retraktor Kelly, 2 palca x 3 palce (5,1 cm x 7,6 cm)	10381780270263
3907R	Vrtljivi retraktor Kelly, 2 palca x 4 palce (5,1 cm x 10,2 cm)	10381780270270
3908R	Vrtljivi retraktor Kelly, 2 palca x 5 palcev (5,1 cm x 12,7 cm)	10381780270287
3982R	Upogljiv vrtljivi retraktor, aluminij, 3 palci x 6-1/2 palca (7,6 cm x 16,5 cm)	10381780270577
4018R	Vrtljivi retraktor za ledvično veno, aluminij, 1 palec x 4 palci (2,5 cm x 10,2 cm)	10381780270607
4105R	Splanhnični vrtljivi retraktor, aluminij, 2 palca x 8 palcev (5,1 cm x 20,3 cm)	10381780270676
4596R	Retraktor kolka Mulier, 2 palca x 2,5 palca (5,1 cm x 6,4 cm)	10381780270751
4603R	Retraktor kolka Meyerding, 1 palec x 5,5 palca (2,5 cm x 14,0 cm)	10381780270829
4615R	Kostni kavelj, 2-1/2 palca (6,4 cm)	10381780270874